


**Montage- und
Bedienungsanleitung
Massagesessel
Sueno V2**

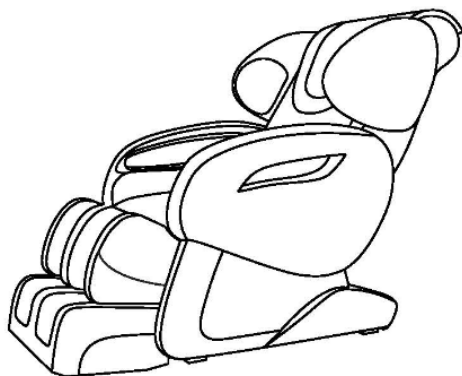

Home Deluxe GmbH | Schanzeweg 2 | 32312 Lübbecke | +49 (0)5743-6039190

www.home-deluxe-gmbh.de

Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung, Nutzungshinweise	3-4
Sicherheitshinweise, Entsorgungshinweise	4-8
Übersicht	9
Montage	10
Transport	11
Installation des Schulterbereichs	12
Fernbedienung	13
Bedienung	14-16
Fehlerbehebung	16
Spezifikationen	17
Reinigung und Pflege, Wartung, Gewährleistung	17
Produktinformation	18

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Nutzungshinweise

1. Trennen Sie den Sessel vor der Reinigung oder Wartung und nach dem Gebrauch von der Stromleitung.
2. Benutzen Sie auf keinen Fall leitende Elemente (z.B. Metall), um den Sessel zu befestigen.
3. Überprüfen Sie den Massagesessel vor jeder Nutzung auf Beschädigungen, wie z. B. Blasenbildung, Risse oder Brandflecken. Wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an den Hersteller und nutzen Sie den Sessel nicht.
4. Halten Sie den Sessel stets trocken und fern von Flüssigkeiten.

Warnung! – Um Personenschäden durch Verbrennungen, Stromschläge etc. zu vermeiden, lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

1. Lassen Sie den Massagesessel nie unbeaufsichtigt, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist.
2. Achten Sie darauf, dass Kinder die Rückenlehne und die Beinstütze nicht hinaufklettern.

3. Verwenden Sie den Massagesessel nur wie in der Bedienungsanleitung vorgeschrieben und für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
4. Eine Verwendung des Massagesessels ist verboten, sobald Sie Mängel am Kabel und/oder am Stecker feststellen, der Sessel nicht ordnungsgemäß funktioniert, Teile beschädigt sind oder der Sessel mit Flüssigkeiten in Kontakt gekommen ist. Kontaktieren Sie in diesem Fall umgehend den Hersteller.
5. Halten Sie das Produkt und die Kabel fern von jeglichen Hitzequellen oder offenem Feuer.
6. Der Massagesessel ist nicht für die Nutzung im Außenbereich konzipiert.
7. Stellen Sie sich nicht auf den Massagesessel. Dieser ist nur im Sitzen zu verwenden.



Sicherheitshinweise

1. Um sicherzustellen, dass Kinder den Sessel nicht als Spielgerät nutzen, lassen Sie diesen nie unbeaufsichtigt.
2. Verwenden Sie die Heizung immer mit besonderer Vorsicht, um Verbrennungen zu vermeiden. Achten Sie bei der Nutzung der Heizfunktion darauf, dass empfindliche und schlecht zirkulierte Hautbereiche durch die Hitze nicht gereizt werden. Eine unaufmerksame Nutzung kann zu Verletzungen führen. Kontrollieren Sie den beheizten Bereich daher regelmäßig auf Schäden.
3. Verbrennungen können auf den unsachgemäßen Gebrauch hinweisen.
4. Vermeiden Sie jegliche Veränderung am Produkt. Biegen, brechen oder falten Sie weder den Sessel, noch einzelne Bestandteile hiervon.
5. Halten Sie Kinder von den erweiterbaren Beinstützen und ähnlichen Teilen fern.
6. Spitze oder scharfe Gegenstände dürfen nicht in der Nähe des Massagesessels benutzt werden.
7. Nutzen Sie das Produkt ausschließlich mit den geeigneten Stromquellen. Hinweise hierzu finden Sie in den technischen Spezifikationen.



Nutzungsumgebung

1. Meiden Sie feuchte oder stark verschmutzte Räume als Aufstellungsort, um mögliche Fehlfunktionen oder/und Stromschläge zu verhindern.
2. Ab einer Temperatur von 40°C oder höher, ist die Verwendung des Sessels untersagt.
3. Vermeiden Sie dauerhafte oder direkte Sonneneinstrahlung.
4. Platzieren Sie den Sessel auf einem ebenen, festen und rutschfesten Untergrund.



Achtung!

1. Der Artikel ist nur für den Innenbereich geeignet.
2. Sorgen Sie für gleichmäßiges Klima und vermeiden Sie große Temperaturunterschiede. Es wird empfohlen, die Temperatur nach und nach bis zur Wunschtemperatur zu steigern/senken.
3. Da bei der Lagerung meist keine üblichen Zimmertemperaturen erreicht werden, nutzen Sie den Massagesessel nicht direkt nach Umgebungswechsel. Lassen Sie den Sessel mindestens eine Stunde bei Zimmertemperatur stehen, damit mögliche Kondensationsfeuchtigkeit keine mechanischen Teile schädigen kann und alle Funktionen gegeben sind. Die Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen führen.



Sicherheitsvorkehrungen

1. Durch das Entfernen von Polstern oder der Sitzfläche können Fehlfunktionen auftreten und die Verletzungsgefahr ist erhöht.
2. Benutzen Sie andere therapeutische Ausstattungen (z.B. elektrische Wärmendecken) nicht zusammen mit dem Sessel, da gewünschte Wirkungen eventuell nicht erzielt werden können oder Verletzungen auftreten können.
3. Warten Sie eine Stunde vor und nach dem Essen, bevor Sie den Massagesessel benutzen, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden.
4. Erlauben Sie weder Kindern, noch Tieren das Spielen und Klettern auf dem Sessel und den zugehörigen Teilen.
5. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Beinstütze, Armstützen und die Rückenlehne des Sessels, um Verletzungen und Fehlfunktionen zu vermeiden.
6. Nutzen Sie den Sessel nicht im nassen Zustand.
7. Die empfohlene Nutzungsdauer am Stück liegt bei 30 Minuten. Achten Sie darauf eine Massagefunktion nicht länger als 5 Minuten auf der gleichen Position laufen zu lassen, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden.
8. Stecken Sie Ihre Gliedmaßen nicht zwischen die Massagerollen, während der Sessel genutzt wird. Dies führt zu Verletzungen.
9. Dieses Produkt ist nicht für die Heilung oder Genesung von Krankheiten konzipiert und ist nicht für einen therapeutischen Einsatz vorgesehen.
10. Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie sich unwohl fühlen, medizinisch versorgt werden müssen oder bereits medizinisch versorgt werden, bevor Sie den Massagesessel nutzen.
11. Entfernen Sie jeglichen Körperschmuck (Ketten, Tücher, etc.) vor der Nutzung.



Kontaktieren Sie Ihren Arzt und bitten ihn um Rat, wenn Sie:

- Medikamente einnehmen, die Sie vom Arzt verschrieben bekommen haben
- eine Wirbelsäulenfehlfunktion, einen Wirbelsäulendefekt, eine Wirbelsäulenverletzung haben
- Rückenprobleme haben
- Diabetes, Osteoporose oder sensorische Beeinträchtigungen haben
- Fehlfunktionen der Gelenke haben
- einen Schrittmacher oder andere elektronische oder medizinisch notwendige Geräte an oder in Ihrem Körper tragen
- schwanger sind
- einen bösartigen Tumor haben
- unter Thrombose oder einer Venenentzündung leiden
- unter einem erhöhten Risiko für Blutgerinnsel leiden
- kürzlich operiert wurden
- etwas Mechanisches in Ihrem Körper implantiert haben, wie z.B. Schrauben oder Klammern



Achtung!

1. Sorgen Sie dafür, dass Kinder den Sessel nicht als Spielgerät nutzen.
2. Nutzen Sie das Produkt nicht unter Drogen-, Medikamenten- oder Alkoholeinfluss.
3. Vermeiden Sie eine direkte Nutzung der Massagerollen an Kopf, Ellenbogen, Kniescheiben und Hüfte.
4. Wenn durch die Massage Ihre Arme oder Beine die Position wechseln, lassen Sie diese einfach locker und wehren Sie sich nicht gegen die Massagerollen.
5. Wenn der Massagesessel mit Flüssigkeiten in Kontakt gerät, ziehen Sie umgehend den Stecker zur Stromzufuhr. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände hierbei nicht feucht oder nass sind.
6. Um einen Stromschlag oder eine Fehlfunktion zu vermeiden, hantieren Sie niemals mit gerissenen oder beschädigten Kabeln oder Steckern.

Nutzen Sie den Massagesessel unter folgenden Umständen nicht:

Beim Auftreten folgender Probleme schalten Sie den Hauptschalter aus und entfernen Sie das Gerät vom Strom:

- wenn Flüssigkeiten auf dem Sessel verschüttet wurden. Dies kann zu elektrischen Schlägen oder Fehlfunktionen führen.
- wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein während einer Massage verspüren, konsultieren Sie sofort Ihren Arzt.
- wenn Sie während der Benutzung Fehlfunktionen oder abnormale Auffälligkeiten feststellen.
- wenn der Strom ausgefallen ist, besteht bei einem plötzlichen Neustart erhöhte Verletzungsgefahr.
- wenn Blitzschlag auftritt.

Montage und Reparatur des Massagesessels

1. Versuchen Sie nicht den Massagesessel selbst zu montieren und/oder zu reparieren. Nutzen Sie den dafür vorgesehenen Kundenservice und/oder professionelle Fachkräfte.

Zu beachten beim Stromkabel und Stromstecker



1. Stellen Sie sicher, dass die angeforderte Leistung mit Ihrer Stromquelle übereinstimmt.
2. Nehmen Sie das Gerät nie vom Strom oder in Betrieb, wenn Sie nasse Hände haben. Dies kann zu fehlerhaften Funktionen und Stromschlägen führen.
3. Entfernen Sie das Gerät vom Strom, indem Sie es am Stecker aus der Steckdose ziehen und nicht am Kabel.
4. Auch wenn die Benutzung des Sessels automatisch ausgeschaltet wird, achten Sie nach Gebrauch immer darauf den Hauptschalter auszustellen und den Netzschalter auf die Position „O“ zu stellen.
5. Platzieren Sie das Kabel nicht unter schweren Gegenständen oder dem Sessel.
6. Wickeln Sie das Kabel nicht um den Massagesessel. Sollte sich das Kabel verdrehen oder verknoten, lösen Sie dies umgehend. Prüfen Sie das Kabel regelmäßig.
7. Benutzen Sie das Kabel nicht im beschädigten Zustand oder mit einer Verlängerung.
8. Benutzen Sie den Sessel nicht, wenn der Stecker lose ist oder andere Auffälligkeiten am Stecker auftreten.
9. Sollte ein Kabel beschädigt sein, kontaktieren Sie umgehend eine Fachkraft. Führen Sie Reparaturen auf keinen Fall eigenhändig durch.




Entsorgungshinweise

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß der gültigen nationalen Vorschriften.
- Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung dieses Produktes müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.


Übersicht

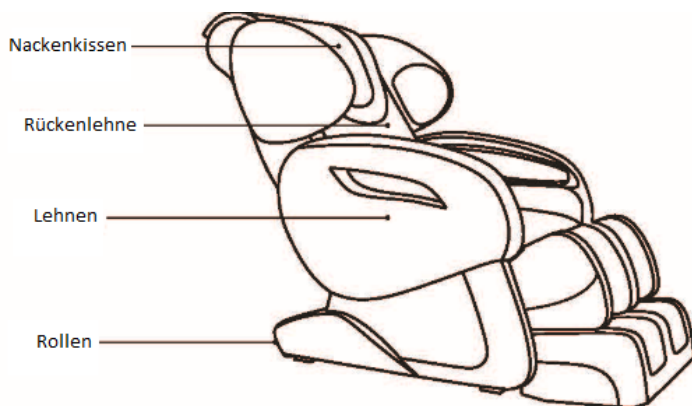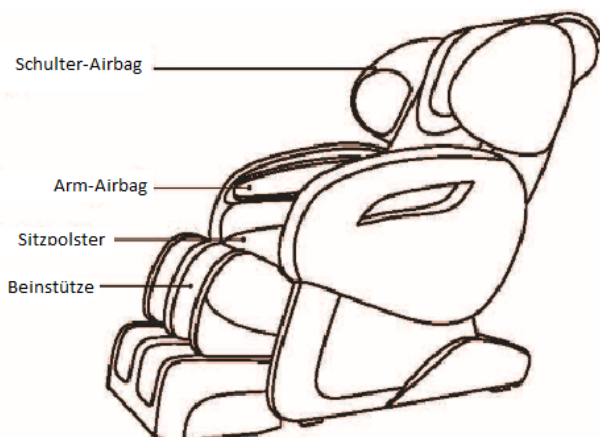

Montage

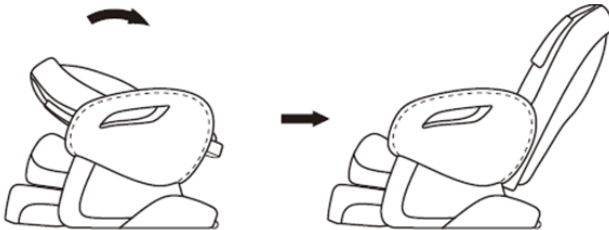

Drehen Sie die Rückenlehne nach hinten, bis sie einrastet.

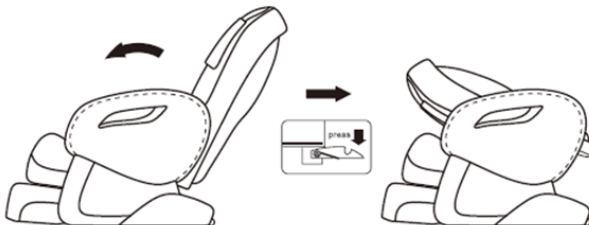

Lösen Sie den Verriegelungshebel (befindet sich im hinteren Teil der Rückenlehne) wie abgebildet, um die Rückenlehne auf das Sitzkissen zu legen.




Die Montage darf nur im ausgeschalteten Zustand durchgeführt werden. Ziehen Sie zur Sicherheit den Netzstecker aus der Steckdose!

Transport

Kippen Sie die Rückenlehne wie in der Abbildung gezeigt nach unten, sodass der Massagesessel auf den Rollen steht. Nun können Sie ihn an die gewünschte Stelle schieben.



Legen Sie eine Decke zwischen Boden und Sessel, um den Boden nicht zu beschädigen.

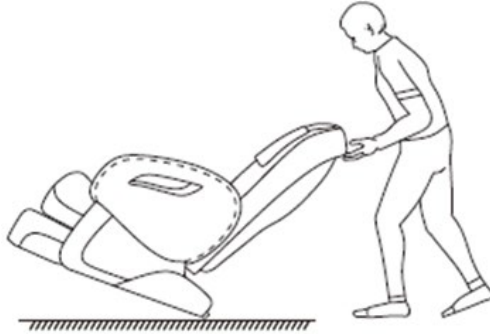


Beachten Sie, dass der Massagesessel nur bei einer Durchgangsbreite von mindestens 90 cm durch die Räumlichkeiten transportiert werden kann.



- *Wenden Sie sich an den Händler oder Verkäufer, wenn der Sessel nicht ordnungsgemäß funktioniert. Beachten Sie vorher unbedingt die Hinweise unter dem Punkt „Fehlerbehebung“.*
- *Bewegen Sie den Stuhl nicht, wenn er in Benutzung ist oder eine Person auf/im Sessel sitzt.*
- *Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gezogen ist, wenn Sie den Sessel bewegen.*


Platzierung des Sessels

Beim Positionieren des Sessels lassen Sie bitte mindestens 100 cm Abstand, damit die Rückenlehne, je nach Programm, ausreichend Platz hat.

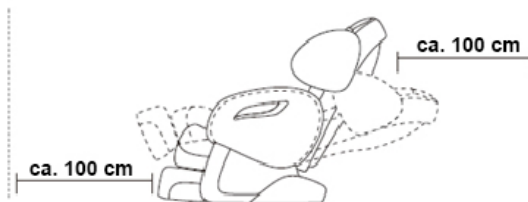


Installation des Schulterbereichs

1. Öffnen Sie den Reißverschluss am Schulterelement. Legen Sie das Schulterelement so an die Rückenlehne, dass die Öffnungen „A“ und „B“ genau übereinander liegen.
2. Verbinden Sie den Luftschlauch „E“ mit dem Luftschlauch „F“ an der Rückenlehne.
3. Verwenden Sie die Schraube (M6 x 16) zur Befestigung an der Rückenlehne.
4. Schließen Sie den Reißverschluss.
5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, für die zweite Schulterstütze.

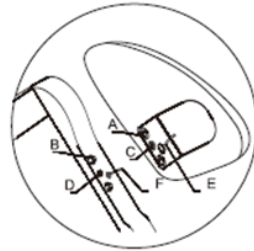


Rückenpolster und Sitzkissen


1. Verbinden Sie das Kabel der Rückenlehne mit dem Massagesessel. Den entsprechenden Stecker finden Sie unter der Sitzfläche.
2. Verbinden Sie die Rückenlehne und die Sitzfläche mit dem Reißverschluss.

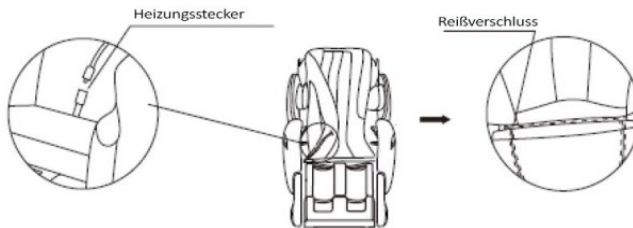

3. Befestigen Sie das Rückenpolster mit dem Reißverschluss am oberen Ende der Rückenlehne.
4. Befestigen Sie das Kissen mit dem Klettverschluss.

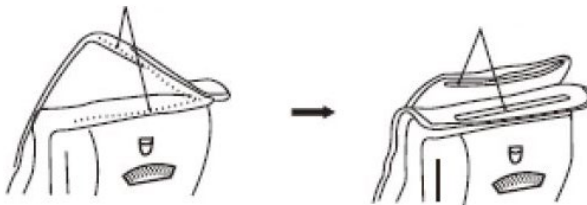

Fernbedienung

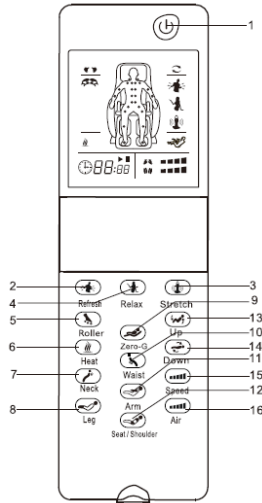


- | | | |
|------------|------------|---------------------------|
| 1. AN/AUS | 2. Beleben | 3. Dehnen |
| 4. Relaxen | 5. Rollen | 6. Heizen |
| 7. Nacken | 8. Beine | 9. Zero-G |
| 10. Taille | 11. Arme | 12. Sitz/Schulter |
| 13. Oben | 14. Unten | 15. Speed/Geschwindigkeit |
| 16. Airbag | | |



- Gehen Sie sorgsam mit dem Bedienelement um. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Fernbedienung und setzen Sie sich nicht auf diese.
- Lassen Sie das Bedienelement nicht fallen. Positionieren Sie es immer in der dafür vorgesehenen Halterung, sofern es nicht benutzt wird.
- Üben Sie bei der Bedienung keine übermäßige Kraft aus.
- Nutzen Sie die Fernbedienung nicht mit nassen Händen. Halten Sie Flüssigkeiten fern.
- Bedienen Sie die Fernbedienung nicht mit scharfkantigen Gegenständen, um Kratzer und weitere Schäden zu vermeiden.

Bedienungsanleitung

Schließen Sie die Fernbedienung an den Sessel an.

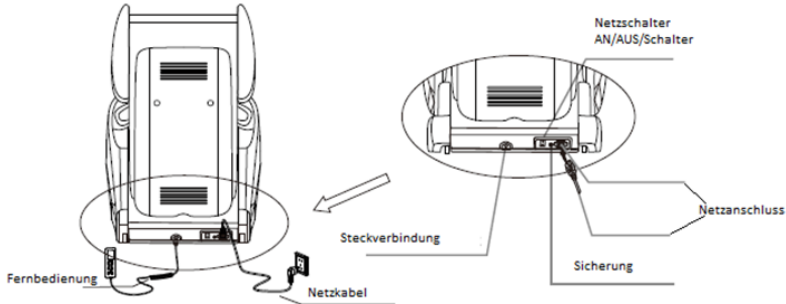

Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht unter dem Sessel liegt und das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist.



Wenn sich die Massagerollen in einer bestimmten Position befinden, kehren sie nach dem Ausschalten automatisch in die Ausgangsposition zurück.



Im automatischen Massagemodus ist die Einstellung der Massagestärke und der Rollenfunktion nicht möglich.

ON/OFF





die Start / Stopp-Steuertaste

Die LCD-Beleuchtung wird aktiviert. Drücken Sie Ihre gewünschte Massagefunktionstaste, um die Massage zu starten.

Drücken Sie die Taste erneut, um alle Massagefunktionen zu beenden. Die Massagerollen kehren in ihre ursprüngliche Position zurück.

Automodus

2. Beleben/Mobilisierung
3. Relaxen/Entspannen
4. Dehnen/Stretch


Wenn Sie einen der automatischen Modi aktivieren, werden alle Luftmassagen gleichzeitig aktiviert. Drücken Sie den Knopf  um die Luftdruckintensität einzustellen und drücken Sie  und  um die Ober- und Unterkörper Luftmassagen zu stoppen. Drücken Sie  um die Heizfunktion zu stoppen oder zu starten.

Manueller Modus



Mit den Tasten 5, 6, und 7 Können Sie die Roll-, Heiz-, und Nackenfunktion aktivieren oder deaktivieren.

Beinmassage




Drücken Sie die Taste  , um die Massage im Beinbereich zu aktivieren. Drücken Sie diese erneut, um die Funktion zu beenden.

Zero-G

Drücken Sie die Zero-G-Taste, um die Zero-G-Funktion zu aktivieren. Das Symbol  wird beleuchtet. Drücken Sie die Zero-G-Taste erneut, um zur Ruheposition zurückzukehren. Das Symbol  wird nicht mehr angezeigt.


Tailenmassage



Drücken Sie die Taste  , um die Massage an der Taille zu aktivieren. Drücken Sie diese erneut, um die Massage zu stoppen.


Armmassage




Drücken Sie die Taste  , um die Luftdruckmassage am Arm zu aktivieren. Drücken Sie diese erneut, um die Funktion zu beenden.

Sitz- und Schultermassage



Drücken Sie die Taste  , um die Sitz- und Schultermassage zu aktivieren. Drücken Sie diese erneut, um die Funktion zu beenden.

Einstellen der Position der Rückenlehne


Halten Sie die Aufwärts-Taste (UP) gedrückt  , bis sich der Stuhl im gewünschten Winkel befindet.

Halten Sie die Abwärts-Taste „unten“ (Down)  gedrückt bis sich der Stuhl im gewünschten Winkel befindet.


Geschwindigkeit

Mit der Taste Speed/Geschwindigkeit  können Sie die Geschwindigkeit in 3 Stufen einstellen.

Airbags / Massage-Luftkissen

Die Schaltfläche  für die Einstellung der Intensität für Arm- und Luftkissen. Bei jedem Tastendruck erhöht sich die Intensität um 1 Stufe. Die maximale Stufe ist 3.

Beenden Sie den Betrieb wie folgt:

Drücken Sie bitte die „ON/OFF“-Taste  . Der Sessel stoppt sofort im laufenden Betrieb. Drücken Sie die Taste nach dem Gebrauch zweimal, um den Stuhl in seine ursprüngliche Position zu bringen.

Fehlerbehebung


Dieser Massagesessel wird von einem intelligenten Mikrocomputer gesteuert und verträgt Spannungsschwankungen von +/- 10%. Falls es zu Problemen kommt, sollten Sie auf folgendes achten:

Situationen	Lösungen
Der Sessel lässt sich nicht einschalten.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Prüfen Sie, ob der Stecker richtig angeschlossen ist und einwandfrei funktioniert. 2) Prüfen Sie, ob der Schalter des Massagesessels auf „ON“ steht.
Der Sessel beendet während der Massage das Programm.	Der Sessel hat eine automatische Schutzfunktion gegen Überlastung und Überhitzung. Schalten Sie den Sessel aus. Warten Sie ca. 1 Std., bis Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
Während des Betriebs funktionieren sowohl der Controller als auch der Massagesessel nicht.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wenn die im Timer eingestellte Zeit abgelaufen ist, drücken Sie die Timer-Funktion erneut, um den Betrieb fortzusetzen. 2) Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein, um den Sessel zu aktivieren.

Spezifikation

Leistung: 220-240 V
Wechselstrom: 50-60 Hz

Energieverbrauch: ca. 100 W
Empfohlene Nutzungsdauer: 30 Minuten

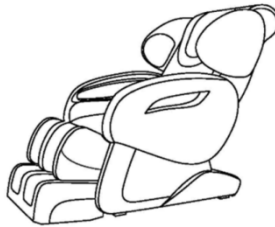

Reinigung und Pflege

Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Hauptschalter auf „OFF“ steht und der Stecker gezogen ist. Benutzen Sie ein trockenes, sauberes Mikrofasertuch, um den Sessel zu reinigen. Zum Reinigen der Fernbedienung benutzen Sie ausschließlich ein trockenes, sauberes Tuch. Bringen Sie die Fernbedienung keinesfalls in Kontakt mit Feuchtigkeit, dies kann zu Fehlfunktionen führen!



Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Verkäufer:

Home Deluxe GmbH
Schanzweg 2
32312 Lübbecke
info@home-deluxe-gmbh.de

Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell: Massagesessel Sueno V2 (schwarz) (Artikel-ID 13587)
Paket 1 von 1 (Artikel-ID: 13589), Paketmaß: 78,5 x 76,5 x 131 cm

Modell: Massagesessel Sueno V2 (beige) (Artikel-ID 13586)
Paket 1 von 1 (Artikel-ID: 13588), Paketmaß: 78,5 x 76,5 x 131 cm

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische
Veränderungen am Artikel vor.