



Bedienungs- anleitung


EASY
HOME[®]
BATHROOM

OSZILLIERENDE ZAHNBÜRSTE



Original-Bedienungsanleitung



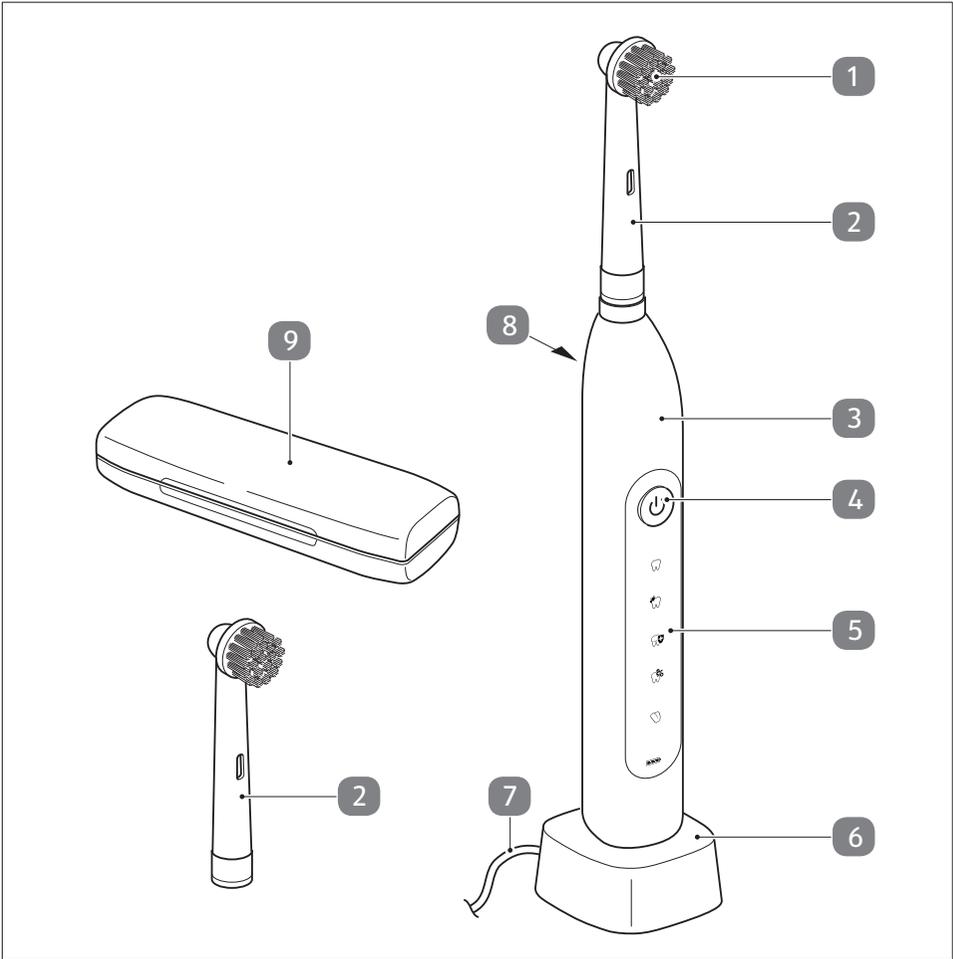

Lieferumfang

- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Bürstenkopf | 6 Ladestation |
| 2 Bürstenaufsatz (2x) | 7 Netzkabel |
| 3 Handteil | 8 Drucksensor LED-Anzeige |
| 4 Ein-/Aus-Funktionstaster | 9 Transportbox |
| 5 Funktionsanzeigen | - Original-Bedienungsanleitung/Garantiekarte |

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	2
Symbole	4
Allgemeines	5
Sicherheitshinweise	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	6
Gefahr für Kinder und erweiterten Personenkreis	6
Gefahr durch Elektrizität	7
Gefahr von Verletzungen sonstiger Ursache	9
Sicherheitshinweise für Akkus	10
Vor dem ersten Gebrauch	11
Auspacken	11
Erstes Aufladen und weitere Ladevorgänge.....	12
Hinweise zum Ladevorgang/Akku.....	13
Bedienung	14
Nach dem Gebrauch	17
Einschaltenschutz beim Transport im Reisegepäck	18
Lagerung.....	18
Ersatz-Zahnbürstenaufsätze	18
Störung und Abhilfe	19
Technische Daten	19
Konformitätserklärung	20
Entsorgung	20
Verpackung und Gerät entsorgen	20
Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel	23

Symbole

 **WARNUNG!** Kennzeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die zu Tod oder schwerer Verletzung führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

 **ACHTUNG!** Bei Nichtbeachtung kann es zu Sachschäden kommen.

 Steht vor Hinweisen und Erklärungen.

 **Schutzgrad IP67:** Staubdicht und vollständiger Schutz gegen Berührung stromführender Teile. Zeitweilig wasserdicht (30 Minuten in 1 Meter Wassertiefe bei Umgebungsdruck).

Schutzklasse II /  : Betriebsmittel mit verstärkter oder doppelter Isolierung zwischen Netzstromkreis und Ausgangsspannung.

 Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

 Das Siegel Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen) bescheinigt, dass ein Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und bei vorhersehbarer Fehlanwendung des gekennzeichneten Produktes die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet sind. Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Sicherheitszeichen.

Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produktes entschieden haben. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gefällt und Sie es gerne benutzen.

In dieser Original-Bedienungsanleitung haben wir genau beschrieben, wie Sie den Artikel optimal und sicher nutzen können. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!



Lesen und befolgen Sie diese Original-Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Gerätes, insbesondere die Sicherheitshinweise, und bewahren Sie sie auf, falls Sie später etwas nachlesen möchten.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Zahnbürste führen.

Wenn Sie den Artikel an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.

Diese Original-Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage www.gt-support.de heruntergeladen werden.

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät dient zum Putzen von Zähnen und ist nur für den Privathaushalt geeignet. Für den gewerblichen Einsatz ist es nicht geeignet.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Zubehör und passenden Zahnbürstenaufsätzen benutzt werden.
- Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Zahnbürste ist kein Kinderspielzeug.
- Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Gefahr für Kinder und erweiterten Personenkreis

- Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet.
- Dieser Artikel kann von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass der Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt wird.

Gefahr durch Elektrizität



Stromschlag-Gefahr! Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung.

Der Umgang mit Flüssigkeiten in Verbindung mit Elektrogeräten erfordert höchste Aufmerksamkeit!

Eine häufige Unfallursache im Haushalt ist Unaufmerksamkeit bei Routinevorgängen. Achten Sie darauf, dass beim Anschließen bzw. Abziehen des Netzsteckers oder bei der Bedienung des Gerätes Ihre Hände stets trocken sind.

- Die Anschlussleitung sowie der Netzstecker dürfen nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Die Ladestation darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. **Stromschlaggefahr!**
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien und setzen Sie es nie Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee oder Frost aus.
- Schließen Sie die Ladestation an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, deren Spannung den **Technischen Daten** entspricht.
- Bei Verwendung eines Zwischensteckers oder Verlängerungskabels müssen diese den gültigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Die angegebene maximale Stromstärke darf nicht überschritten werden.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen können.
- Benutzen Sie das Gerät nicht:
 - wenn das Gerät beschädigt ist,
 - Anschlussleitung oder Netzstecker beschädigt sind,
 - das Gerät heruntergefallen ist.

- Wickeln Sie die Anschlussleitung der Ladestation vor jedem Gebrauch vollständig ab. Achten Sie dabei darauf, dass die Anschlussleitung nicht geklemmt, gequetscht oder durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose:
 - wenn Sie die Ladestation nicht benutzen,
 - nach dem Ladevorgang,
 - bevor Sie das Gerät reinigen oder wegstellen,
 - wenn während des Betriebes offensichtlich eine Störung auftritt,
 - bei Gewitter.Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht an der Anschlussleitung.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät oder an der Anschlussleitung vor.
- Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Beachten Sie auch die Garantiebedingungen (siehe Garantiekarte).
- Lassen Sie das Handteil nicht herunterfallen und setzen Sie es keinen mechanischen Stößen aus.
- Die Anschlussleitung der Ladestation kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung muss das Gerät entsorgt werden.
- Das Handteil darf nur mit der mitgelieferten Ladestation geladen werden.
- Das Gerät darf nicht an eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem, wie z. B. einen Dämmerungsschalter oder eine Funksteckdose angeschlossen werden.

Gefahr von Verletzungen sonstiger Ursache

- Verlegen Sie die Anschlussleitung so, dass sie nicht zur Stolperfalle wird.
- Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Bürstenaufsätze sofort, um Verletzungen im Mund- und Zahnbereich zu vermeiden.

ACHTUNG! Achtung Sachschäden

- Lassen Sie das Handteil nicht herunterfallen. Wenn dies doch passiert, nutzen Sie die Zahnbürste nicht mehr. Lassen Sie sie von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen.
- Stellen Sie die Ladestation auf einen stabilen, ebenen und hitzebeständigen Untergrund. Achten Sie dabei auf einen ausreichend großen Abstand zu starken Wärmequellen wie Heizplatten, Heizungsrohren u. Ä.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau und stellen Sie die Ladestation so auf, dass die beim Gebrauch auftretende Wärme des Gehäuses rundum gut abziehen kann.
- Legen Sie keine Gegenstände wie z. B. Tücher oder Zeitschriften auf die Ladestation. Es besteht Brandgefahr!
- Auf der Unterseite des Gerätes befindet sich eine gummierte Standfläche. Da die Möbel bzw. Bodenoberflächen aus den verschiedenen Materialien bestehen und mit den verschiedenen Pflegemitteln behandelt werden, kann es nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Standfläche angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o. Ä.

Sicherheitshinweise für Akkus

- Der Akku ist im Produkt fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Die Kontakte/Anschlüsse des Akkus niemals kurzschließen. Den Akku bzw. das Produkt nicht ins Feuer werfen. Es besteht Explosions- und Brandgefahr!
- Den Akku regelmäßig nachladen, auch wenn das Produkt nicht benötigt wird. Durch die verwendete Akkutechnik ist dabei keine vorherige Entladung des Akkus erforderlich.
- Der Akku des Produkts niemals unbeaufsichtigt laden.
- Die Akkus müssen sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Wenden Sie sich vor der Entsorgung des Produktes an einen elektrischen Fachmann oder Ihren Händler, um die Akkus auszubauen und umweltgerecht zu entsorgen.

⚠️ WARNUNG! Explosionsgefahr!

Akkus können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Erhitzen Sie die Akkus nicht und werfen Sie sie nicht in offenes Feuer.

⚠️ WARNUNG! Verätzungsgefahr durch Batterieflüssigkeit!

Je älter Akkus werden, desto größer wird die Gefahr, dass Batterieflüssigkeit ausläuft. Ausgelaufene Batterieflüssigkeit kann zu Verätzungen führen.

- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten.

- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batterieflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie ggf. einen Arzt auf.
- Halten Sie Akkus von Kindern fern.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Kinder oder Tiere eine Batterie verschluckt haben.

Vor dem ersten Gebrauch

Auspacken


- Nehmen Sie Gerät und Zubehör aus der Verpackung.
- Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und wickeln Sie die Anschlussleitung vollständig ab.
- Kontrollieren Sie, ob die Zahnbürste oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Zahnbürste nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
- Überprüfen Sie, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der Ihres Haushaltes übereinstimmt. Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite der Ladestation.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch vor dem ersten Gebrauch, um mögliche Verpackungs- und Produktionsrückstände zu entfernen.
- Spülen Sie die Bürstenaufsätze **2** unter fließendem Wasser ab und wischen Sie beide Teile trocken.
- Stellen Sie die Ladestation **6** auf einen stabilen und ebenen Untergrund.

Erstes Aufladen und weitere Ladevorgänge

- Schließen Sie die Ladestation **6** an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an und setzen Sie das Handteil **3** auf die Ladestation.

i Lassen Sie das Handteil **3** beim ersten Aufladen ca. **16 Stunden** auf der Ladestation **6**.

Blinkt die Akkuanzeige **10** nach dem Drücken des Ein-/Aus-Funktionstasters **4** für ca. 30 Sekunden rot und die Zahnbürste schaltet sich nicht ein, muss der Akku aufgeladen werden.

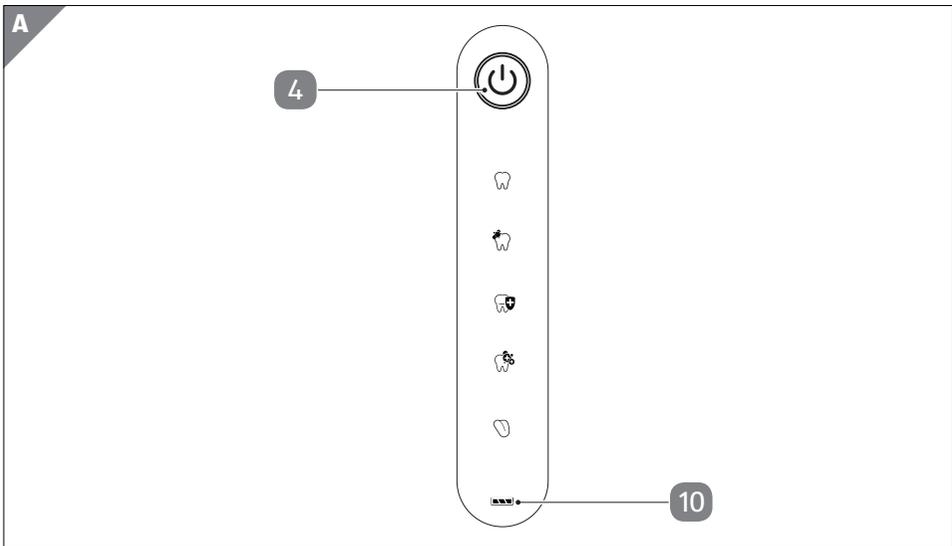

- Die Akkuanzeige **10** blinkt langsam rot, wenn der Akku geladen wird.
- Die Akkuanzeige **10** leuchtet grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Hinweise zum Ladevorgang/Akku

- Eine Überladung des Akkus ist ausgeschlossen. Ist der Akku aufgeladen, nehmen Sie das Handteil von der Ladestation und ziehen Sie den Netzstecker der Ladestation aus der Steckdose.
- Wenn die Bewegungen des Zahnbürstenaufsatzes spürbar nachlassen oder ein erschöpfter Akku am Handteil angezeigt wird (Akkuanzeige 10 blinkt orange), ist ein Aufladen des Akkus erforderlich.
- Sie tragen zur Pflege des Akkus bei, indem Sie den Akku erst wieder vollständig laden, wenn die Akkuanzeige 10 orange blinkt.

ACHTUNG! Ein dauerndes Aufladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.

 Eine rot blinkende Akkuanzeige 10 nach dem Drücken des Ein-/Aus-Funktionstasters 4 signalisiert einen erschöpften Akku.

In diesem Ladezustand lässt sich die Zahnbürste nicht einschalten. Nach dem Drücken des Ein-/Aus-Funktionstaster 4, blinkt die Akkuanzeige für ca. 30 Sekunden rot. Die Zahnbürste muss aufgeladen werden.

Nach kurzer Ladezeit können Sie die Zahnbürste jedoch erneut einmal benutzen. Laden Sie den Akku anschließend vollständig auf.


Laden Sie das Handteil 3 für ca. 16 Stunden auf. Das Erwärmen des Handteils während des Aufladens ist normal.

Der Ladevorgang erfolgt über Induktion und kann durch metallische Gegenstände in der Nähe der Ladestation beeinträchtigt werden. Halten Sie einen Mindestabstand zu metallischen Gegenständen von 10 cm mit der Ladestation ein.

Trennen Sie die Ladestation vom Stromnetz, sobald der Ladevorgang beendet ist.

Bedienung

- Stecken Sie den Bürstenaufsatz **2** gerade auf das Handteil **3**. Um den Zahnbürstenaufsatz abzunehmen, diesen vom Handteil gerade abziehen.
- Befeuchten Sie den Bürstenkopf **1** und tragen Sie Zahncreme auf.
- Setzen Sie die oszillierende Zahnbürste erst in Gang, nachdem sich die Bürste im Mund befindet.

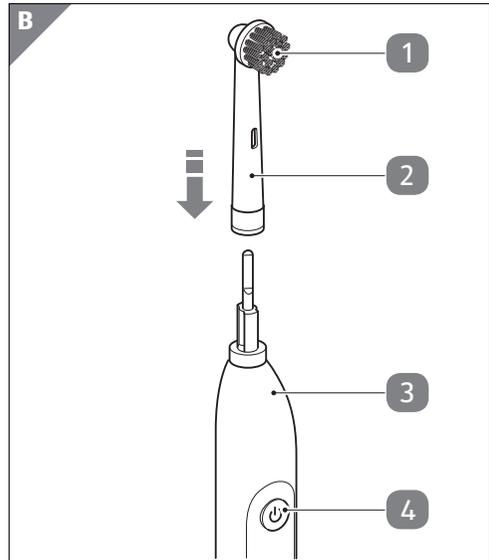

i Die Zahnbürste oszilliert und macht nach jeweils ca. 30 Sekunden ein einmaliges kurzes Stoppen des Motors und läuft anschließend weiter.

2 Minuten nach dem Start erfolgt ein dreimaliges kurzes Stoppen des Motors und läuft anschließend weiter.


Anschließend erfolgen abwechselnd einmaliges und kurzes dreimaliges Stoppen des Motors alle 30 Sekunden.

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Funktionstaster **4**, um die Zahnbürste einzuschalten.

Durch wiederholtes Drücken des Ein-/Aus-Funktionstasters **4** können Sie innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten folgende Funktionen abrufen:


i Nach dem Einschalten wird die zuletzt benutzte Funktion (11 bis 15, Symbol leuchtet weiß) angezeigt. Die Akkuanzeige (10) zeigt für ca. 5 Sekunden den Ladezustand an:

- **grün** → Ladezustand OK
- **blinkt orange** → Aufladung erforderlich
- **blinkt rot** → Akku leer, Zahnbürste lässt sich nicht einschalten. Akku aufladen.

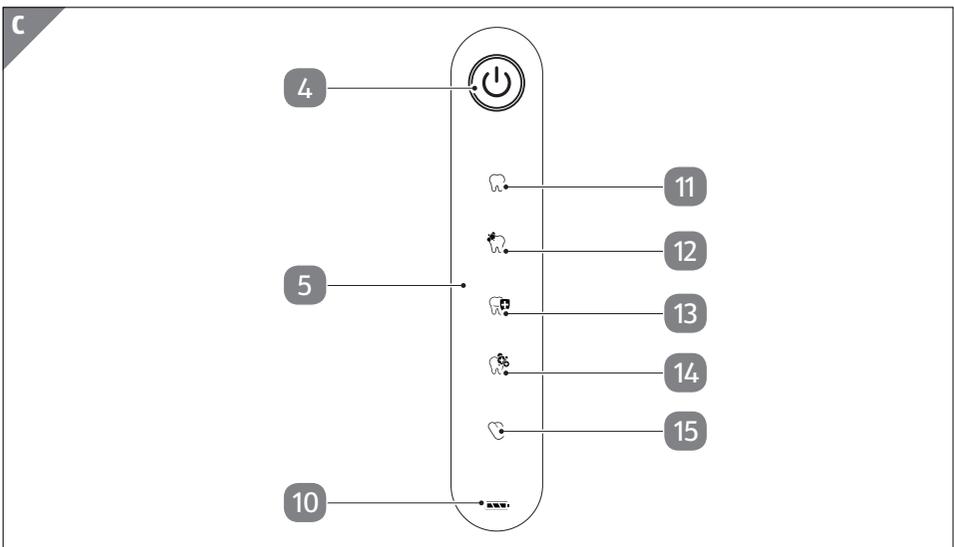

- 11 **Täglich:** 4800 Oszillationen/Min., ±15%
- 12 **Polieren:** 4000 Oszillationen/Min., ±15%
- 13 **Empfindliche Zähne und Zahnfleisch:**
3500-5500 Oszillationen/Min., ±15%
- 14 **Tiefenreinigung:** 3500-5500 Oszillationen/Min., ±15%
- 15 **Zungenreinigung:** 4300 Oszillationen/Min., ±15%

i Die Zahnbürste ist mit einem Drucksensor ausgestattet. Die Drucksensor LED-Anzeige **8** leuchtet rot, sobald Sie den Bürstenkopf zu kräftig gegen die Putzstelle drücken. Sobald Sie den Druck verringern, erlischt die LED.

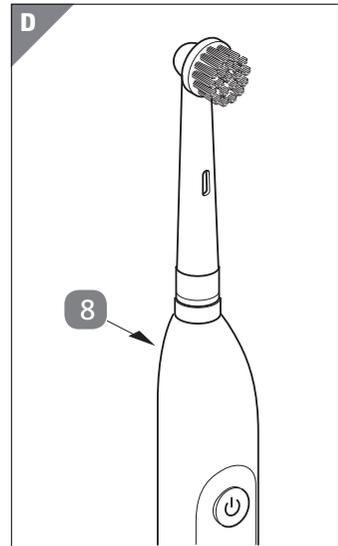

☞ **Täglich:** Die Zahnbürste oszilliert gleichmäßig und macht nach jeweils ca. 30 Sekunden eine kurze Pause. Wenn Sie Ihre Zähne in 4 Putzabschnitte unterteilen und jeden Abschnitt 30 Sekunden putzen, erreichen Sie die empfohlene und gleichmäßige Putzdauer von 2 Minuten. 2 Minuten nach dem Start erfolgt ein dreimaliges kurzzeitiges Stoppen des Motors. Anschließend erfolgen abwechselnd Pause und kurzzeitiges dreimaliges Stoppen des Motors alle 30 Sekunden.

☞ **Polieren:** Die Zahnbürste oszilliert gleichmäßig mit höherer Oszillationszahl (Pausen wie unter **Täglich** beschrieben).

☞ **Empfindliche Zähne und Zahnfleisch:** Die Zahnbürste oszilliert zu- und abnehmend in kurzen Intervallen (Pausen wie unter **Täglich** beschrieben).

☞ **Tiefenreinigung:** Die Zahnbürste oszilliert zunehmend im langen Intervall (Pausen wie unter **Täglich** beschrieben).

☞ **Zungenreinigung:** Die Zahnbürste oszilliert gleichmäßig mit niedriger Oszillationszahl (schaltet sich nach 25 Sekunden aus).

Nach dem Gebrauch

- Ziehen Sie den Bürstenaufsatz **2** vom Handteil **3** ab und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser. Klopfen Sie ihn anschließend mit der Aufnahmeöffnung kräftig gegen ein Handtuch und trocknen Sie ihn ab.



Achten Sie darauf, dass der Bürstenaufsatz möglichst schnell trocknen kann. Legen Sie ihn keinesfalls ins Wasser zur Aufbewahrung.

- Spülen Sie die Bürstenaufnahme des Handteils **3** (Bürstenaufnahme nach unten halten) kurz ab, und wischen Sie die Aufnahme und das Handteil anschließend trocknen.



Ziehen Sie zum Reinigen der Ladestation unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Ladestation darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Stromschlaggefahr!

- Reinigen Sie die Ladestation **6** nur mit einem feuchten Tuch und stellen Sie sicher, dass sie vollständig trocken ist, bevor Sie sie erneut an das Stromnetz anschließen.

Einschaltenschutz beim Transport im Reisegepäck

 Um ein ungewolltes Einschalten, z. B. während des Transports in der Transportbox **9** oder einem Koffer zu vermeiden, kann der Ein-/Aus-Funktionstaster **4** deaktiviert werden.

- Drücken und halten Sie den Ein-/Aus-Funktionstaster **4** für mindestens 5 Sekunden. Die Akkuanzeige **10** blinkt schnell fünf Mal grün. Die Zahnbürste lässt sich nun durch Drücken des Ein-/Aus-Funktionstasters **4** nicht mehr einschalten.
- Aktivieren Sie den Ein-/Aus-Funktionstaster, indem Sie ihn erneut für mindestens 5 Sekunden drücken. Die Akkuanzeige **10** leuchtet grün und Funktionsanzeige **Täglich** blinkt. Die Zahnbürste ist nun wieder betriebsbereit.

Alternativ kann der Taster auch durch das Aufsetzen auf die an das Stromnetz angeschlossene Ladestation aktiviert werden. Ein kurzes Aufsetzen reicht hierbei aus.

Lagerung

Bei längerem Nichtgebrauch lagern Sie das Gerät in der Transportbox an einem trockenen, vor direktem Sonnenlicht geschützten, frostfreien Ort.

Ersatz-Zahnbürstenaufsätze

Wir empfehlen einen Tausch des Zahnbürstenaufsatzes nach 3 Monaten. Zahnbürstenaufsätze sind Verschleißteile und unterliegen nicht den Garantiebestimmungen!

Neue Zahnbürstenaufsätze können über das Servicecenter bestellt werden. Den Preis inkl. MwSt und die Versandkosten können Sie dort erfahren.

Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte aus der Garantiekarte.

Störung und Abhilfe

Fehler: Keine Funktion, Akkuanzeige 10 blinkt rot.

Mögliche Ursache und Abhilfe:

- Akku leer? Handteil auf die Ladestation setzen und Netzstecker anschließen.

Fehler: Keine Funktion, Akkuanzeige 10 blinkt grün.

Mögliche Ursache und Abhilfe:

- Einschaltenschutz aktiviert? Einschaltenschutz deaktivieren, siehe **Einschaltenschutz beim Transport**

Fehler: Akkuanzeige 10 zeigt den Ladevorgang nicht an

Mögliche Ursache und Abhilfe:

- Ladestation angeschlossen? Netzstecker an das Stromnetz anschließen.

Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät einstecken.

Technische Daten

Modell: GT-TBO-05

Ladestation

Netzspannung: 100-240 V~, 50-60 Hz

Leistungsaufnahme: 2 W

Schutzklasse: II / 

Schutzgrad: IP67

Handteil

Akku: 3,7 V, 800 mAh (Li-Ion)

Betriebsdauer (Akku voll): ca. 90 Minuten

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter **www.gt-support.de**

Entsorgung

Verpackung und Gerät entsorgen

- Entsorgen Sie die Verpackung und das Gerät sortenrein.



Das Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Sollte das Gerät nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nimmt, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird.

Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Fragen Sie den zuständigen Müllbeseitigungsverband nach den notwendigen Maßnahmen zur Entsorgung, um Umweltgefährdungen zu vermeiden.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Müllimers.

Geben Sie Batterien und Akkus nur in entladendem Zustand ab.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde/Ihres Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von ihnen entsorgt werden.

Zur getrennten Entsorgung müssen die Akkus entnommen werden. Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu öffnen oder zu zerlegen, um den Akku selbst zu entfernen. Der Akku muss von qualifizierten Fachkräften entfernt werden.

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung.*

Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



*Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



AT

Vertrieben durch:

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG
BEI DEN MÜHREN 5
20457 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST

809217

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
GT-TBO-05

10/2021

3

**JAHRE
GARANTIE**