



Használati útmutató



Háromrészes masszázságy

crane




Tartalomjegyzék

Áttekintés	3
Használat	4
A szállítás terjedelme/alkatrészek	7
Általános információk	8
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót	8
A szimbólumok magyarázata	8
Biztonság	9
Rendeltetésszerű használat	9
Biztonsági utasítások	9
Első használat	11
A masszázsszágy és a szállítási terjedelem ellenőrzése	11
Használat	11
A masszázsszágy felállítása	11
Fekvési magasság beállítása	13
Kartámaszok beállítása	13
Fejtámasz és kéztámasz beállítása	14
Elhelyezkedés a masszázsszágyon	14
Felkelés a masszázsszágyból	15
Masszázsszágy összehajtása	16
Tisztítás és ápolás	17
Karbantartás	17
Tárolás	18
Műszaki adatok	18
Ártalmatlanítás	18
Csomagolás ártalmatlanítása	18
A masszázsszágy ártalmatlanítása.....	18

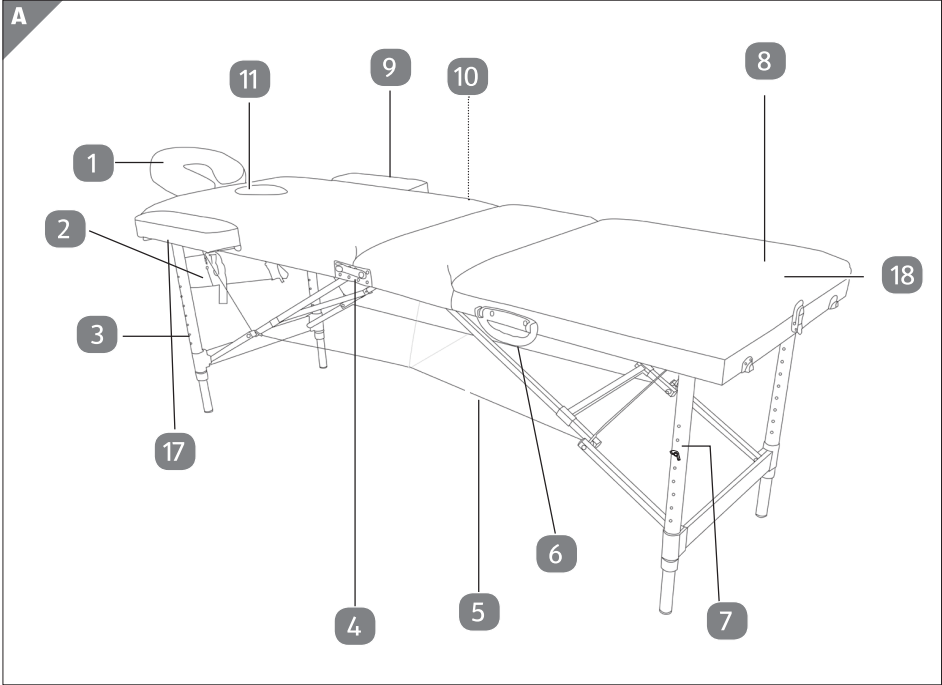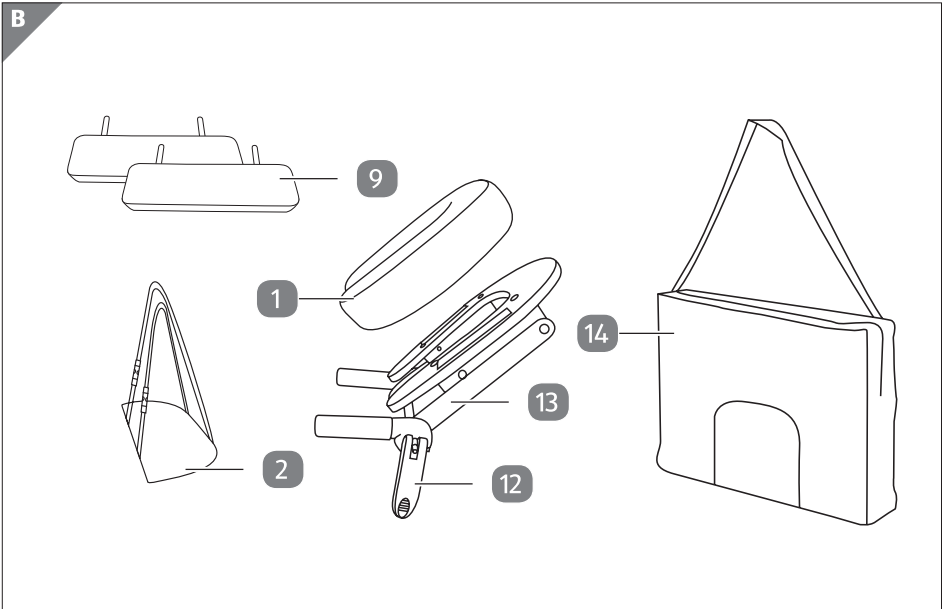
A**B**

C


1.





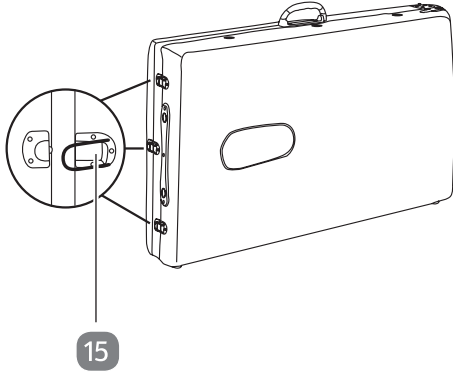





2.

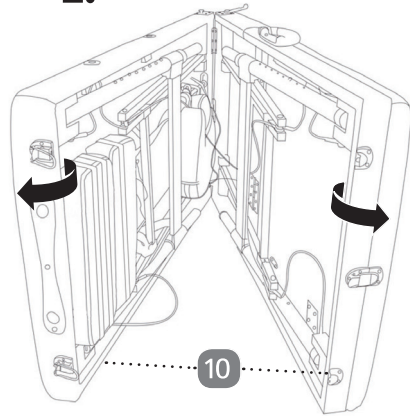

3.

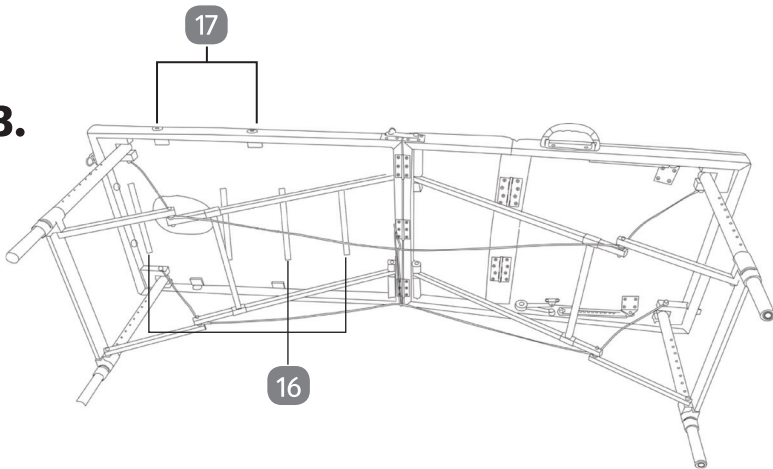

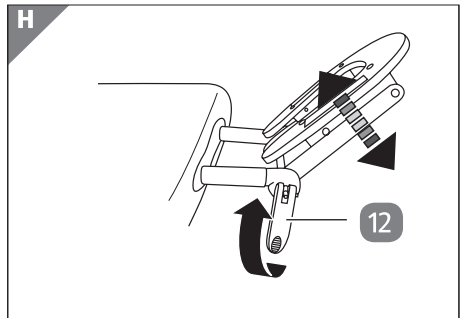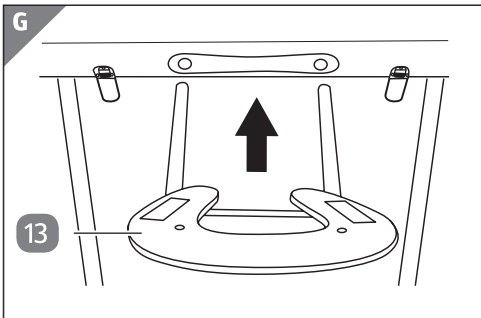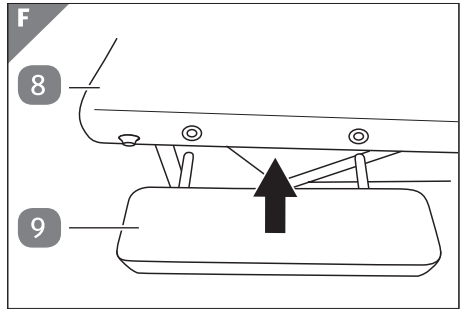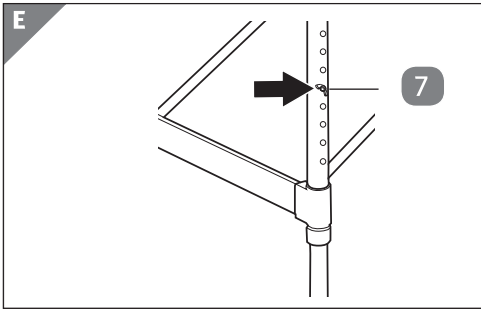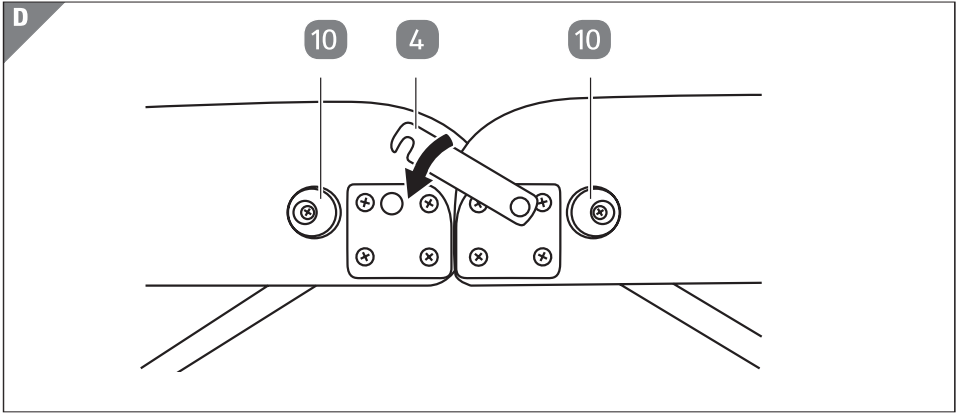

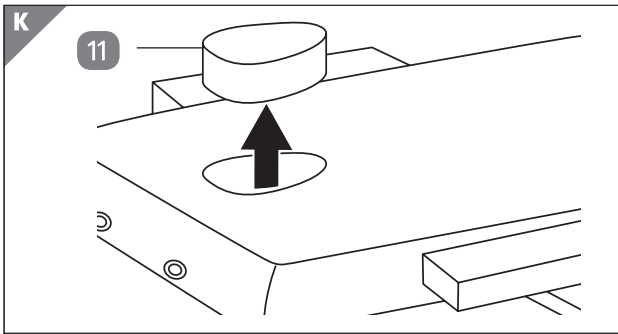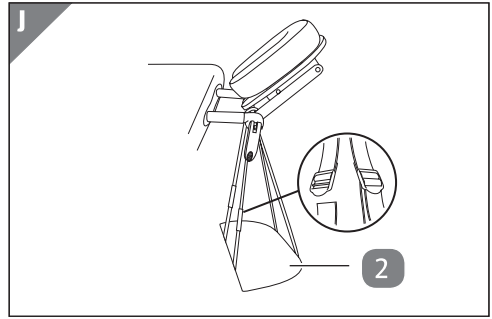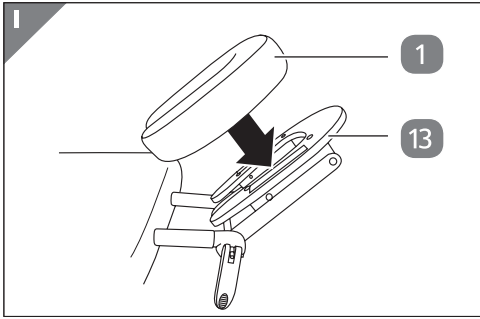

A szállítás terjedelme/alkatrészek

- 1 Párna (fejtámla)
- 2 Kéztámasz
- 3 Láb, 4x
- 4 Rögzítő, 2x
- 5 Drótsodrony
- 6 Hordozófogantyú
- 7 Csavar, 4x
- 8 Fekvőfelület
- 9 Kartámasz, 2x
- 10 Műanyag láb, 4x
- 11 Fejrész párnája, levehető
- 12 Rögzítőkar (fejtámla)
- 13 Keret (fejtámla)
- 14 Hordtáska
- 15 Rögzítő, 3x (2x a masszázsgyhoz, 1x a lábészhez)
- 16 Gumi tartó, 4x
- 17 Pozicionáló furatok
- 18 Lábrész

Általános információk

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



Jelen használati útmutató a 3 részből álló masszázsságyhoz tartozik (a továbbiakban: „masszázsasztal”). Fontos információkat tartalmaz az összeszerelésről és a kezeléssel.

A masszázsságy használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket vagy a masszázsságy sérülését eredményezheti.

A használati útmutató az Európai Unióban alkalmazandó szabványokon és előírásokon alapul. Külföldön tartsa be az adott országban alkalmazandó irányelveket és jogszabályokat is.

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi használatához. Ha harmadik félnek továbbadja a masszázsságyat, feltétlenül mellékelje ezt a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

Ebben a használati útmutatóban, a következő szimbólumok és figyelmeztetések találhatóak.



VIGYÁZAT!

Ez a figyelmeztető jel/szimbólum alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amely, ha nem kerüljük el, enyhe vagy közepes sérülést okozhat.

ÉRTEŚÍTÉS!

Ez a figyelmeztetés az esetleges anyagi károkra hívja fel a figyelmet.



Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt az összeszerelésről vagy a használatról.



A termékben használt fa FSC®-tanúsítvánnyal rendelkező erdészeti társaságoktól származik, amelyek követik az FSC® alapelveit. A Forest Stewardship Council® (FSC) célja világszerte a felelősségteljes erdőgazdálkodás.



A „tanúsított biztonságot” jelző pecsét (GS jel) tanúsítja, hogy egy termék megfelel a termékek biztonságáról szóló német törvény (ProdSG) követelményeinek. A GS jelölés azt jelzi, hogy a jelöléssel ellátott termék rendeltetésszerű használat és előre látható rendellenes használat esetén nem veszélyezteti a felhasználó biztonságát és egészségét. Ez a TUV SÜD által kiadott önkéntes biztonsági jelzés.

Biztonság Rendeltetésszerű használat

A masszázsgyógát kizárólag fekvőfelületként tervezték. Kizárólag magáncélú felhasználásra tervezték, nem alkalmas kereskedelmi célokra.

Csak az ebben a használati útmutatóban leírtak szerint használja a masszázsgyógát. Minden más felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül, és anyagi károkat, vagy akár személyi sérülést is okozhat. A masszázsgyógát nem gyerekjátéknak készült.

A gyártó vagy kereskedő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

Biztonsági utasítások



Sérülésveszély!

A nem megfelelő használat esetén sérülésveszély áll fenn.

- A sérülések és károk elkerülése érdekében javasoljuk, hogy két személy szerelje össze a masszázsgyógát.
- Helyezze a masszázsgyógát vízszintesen és stabilan egy sima, szilárd felületre, hogy az ne dőljön el vagy boruljon fel.
- Mindig rögzítse a masszázsgyógát mindkét oldalán a rögzítővel, mielőtt valaki a masszázsgyógára fekküdne.
- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játsszanak a masszázsgyógával.
- Óvatosan nyissa ki és csukja össze a masszázsgyógát, hogy ne csípje be az ujjait. A mozgó alkatrészek környékén alapvetően fennáll a becsípődés veszélye.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodás veszélye!

A masszázságy nem megfelelő használata károsodást okozhat.

- A masszázságyat csak sík felületre és azonos hosszúságú lábakra állítsa fel.
- Ne tegye ki a masszázságyat közvetlen napsugárzásnak.
- Ne helyezze a masszázságyat hőforrások közelébe.
- Ne helyezze a masszázságyat forró felület közelébe.
- A masszázságyat legfeljebb 125 kg súlyú felhasználó használhatja.
- Ne használja tovább a masszázságyat, ha a lábak vagy a fekvőfelület repedt, vagy a drótsodrony kirojtosodott.
- A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti alkatrészekre cserélje ki.
- A javításokat csak szakember végezheti el.
- Ne módosítsa a masszázságy szerkezetét.
- Ne változtassa meg a mozgó alkatrészek helyzetét.
- Helyezzen egy takarót a masszázságy alá, amikor az oldalára fekteti (pl. összeszereléskor, vagy amikor a lábakat hosszabbra/ rövidebbre állítja).
- Ne nyissa fel erővel a masszázságyat, ha a lábak akadnak. Keresse meg és hárítsa el a probléma okát, és csak ezután állítsa fel a masszázságyat.

Első használat

A masszázsgy és a szállítási terjedelem ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Károsodás veszélye!

Ha éles késsel vagy más hegyes tárggyal óvatlanul nyitja ki a csomagolást, a masszázsgy könnyen megsérülhet.

– Nagyon óvatosan járjon el a kibontásakor.

1. Vegye ki a masszázsgyat a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a szállítmány teljese-e (lásd az A és B ábrát).
3. Ellenőrizze, hogy a masszázsgy vagy az egyes részei sérültek-e. Ebben az esetben ne használja a masszázsgyat. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a jótállási jegyen található szerviz címén keresztül.

Használat

A masszázsgy felállítása



Sérülésveszély!

A nem megfelelő használat esetén sérülésveszély áll fenn.

- Helyezze a masszázsgyat vízszintesen és stabilan egy sima, szilárd felületre, hogy az ne dőljön el vagy boruljon fel.
- Mindig rögzítse a masszázsgyat mindkét oldalán a rögzítőekkel, mielőtt valaki a masszázsgyra feküdne.
- Óvatosan nyissa ki és csukja össze a masszázsgyat, hogy ne csípje be az ujjait.
- Minden használat előtt ellenőrizze a masszázsgy esetleges sérüléseit.
Ne használja a masszázsgyat, ha sérült.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodás veszélye!

Ha nincs elegendő szabad hely a masszázságy felállításakor, sérülést okozhat a környező bútorokban és tárgyokban.

– A masszázságy felállításakor tartson legalább két méter távolságot minden oldalról.

1. Fogja meg a masszázságyat a fogantyúnál **6**, és csomagolja ki a hordtáskából **14**.
2. Állítsa fel az összecukott masszázságyat egy arra alkalmas területen a négy műanyag lábra **10** (lásd az 1. lépést a **C. ábrán**).
3. Nyissa ki a masszázságy mindkét rögzítőjét **15**, és nyissa szét a masszázságyat (lásd a **C. ábra 2. lépését**).
4. Vegye ki az összes alkatrészt a gumi tartókból **16**.
5. Hajtsa szét teljesen a fekvőfelület **8** mindkét részét (lásd a **C. ábra 3. lépését**). A lábak **3** automatikusan rögzülnek 90°-os szögben.
6. Emelje fel középen a masszázstasztalt, és helyezze a lábakra.
7. Győződjön meg arról, hogy a fekvőfelület vízszintes.
Ha a fekvőfelület még nem vízszintes, igazítsa meg a drótsodronyt **5**, és szükség esetén fejtse ki enyhe nyomást a fekvőfelületre.
8. Rögzítse a fekvőfelület mindkét felét a rögzítővel **4** (lásd a **D. ábrát**).

Sikeresen felállította a masszázságyat, és most beállíthatja a fekvőfelület magasságát, és felszerelheti a kartámaszokat **9**, a kéztámaszt **2**, valamint a fejtámaszt **1** / **13**.



A középső rögzítőt kinyitva állítsa be a lábreszek **18** magasságát.

Fekvőfelület magasságának beállítása

A masszázsszék magasságát a lábakon **3** lévő csavarok **7** kioldásával és reteszelésével állíthatja be.



A kartámaszok, a fejtámasz és a kéztámasz beállítása előtt állítsa be a fekvőfelület magasságát.

1. Fektesse a masszázsszék a bal oldalára. A masszázsszék most a négy műanyag lábon **10** áll.
2. Lazítsa meg a csavarokat a magasságállítás feloldásához.
3. Állítsa be a lábakat egyenlő hosszúságúra a csövek széthúzásával vagy összetolásával.
4. Rögzítse újra a magasságbeállítást a csövek összehangolásával, hogy a csavarok biztonságosan rögzüljenek (lásd az **E. ábrát**).

Mind a négy lábat egyenlő mértékben kell meghosszabbítani vagy lerövidíteni. Ügyeljen arra, hogy végül mind a négy lábnak azonos hosszúságúnak kell lennie.

Sikeresen meghosszabbította/lerövidítette a masszázsszék lábait.

Kartámaszok beállítása



Sérülésveszély!

Ha a kartámaszokra helyezi a testsúlyát, azok leeshetnek, mert nincsenek szorosan a masszázsszékhez rögzítve.

Ez sérülésveszélyes lehet.

- Ne helyezze a testsúlyát a kartámaszokra, csak a karjait fektesse rájuk.
- A kartámaszokat csak a felhasználó elhelyezkedését követően hajtja fel.
- Csúsztassa a kartámaszokat **9** ütközésig a fekvőfelület **8** oldalsó furataiba (lásd az **F. ábrát**).

Fejtámasz és kéztámasz beállítása



Sérülésveszély!

Ha a fejtámasz reteszelő karja nincs megfelelően rögzítve, akkor előfordulhat, hogy a fejtámasz hirtelen lehajlik. Ez sérülésveszéllyel jár a masszázsigénylő személy számára.

- A masszázsigénylő használata előtt rögzítse megfelelően a fejtámasz reteszelő karját.

A fejtámasz egy keretből **13** és egy párnából **1** áll.

1. Illessze be a fejtámasz keretét a fekvőfelület fejdoldali részének mindkét furatába **8** (lásd a **G. ábrát**)
2. Rögzítse a fejtámasz keretét a kívánt szögbe a rögzítőkar segítségével **12** (lásd a **H ábrát**).
3. Csatlakoztassa a fejtámasz párnáját a kerethez a tépőzáras rögzítőelem segítségével (lásd az **I. ábrát**)

Sikeresen rögzítette a fejtámaszt a masszázsigénylőhöz, és most már beállíthatja a kéztámaszt **2**.

- Akassza a kéztámaszt a fejtámasz keretére (lásd a **J. ábrát**).
Most beállíthatja a kéztámasz kívánt hosszát és helyzetét.

Elhelyezkedés a masszázsigénylőn



Sérülésveszély!

- Ha helytelen módon fekszik fel a masszázsigénylőre, akkor előfordulhat, hogy azt nem megfelelően terheli meg.
Ez a masszázsigénylő felborulásához és sérüléshez vezethet.
 - Ne üljön a masszázsigénylő fej- vagy láboldali végére.
 - Mindig középen helyezkedjen el a fekvőfelületen.
1. Ha hason szeretne feküdni, vegye ki a fejpárnát **11** a fekvőfelületből **8** (lásd a **K. ábrát**).
 2. Üljön a fekvőfelület közepére.

3. Feküdjön a masszázsgyóra a kívánt helyzetben. Ügyeljen arra, hogy mindig a masszázsgyó közepén helyezkedjen el, hogy a munkaterhelés eloszlása egyenletes legyen.



A masszázsgyó munkaterhelése a fekvő személy testtömegéből (felhasználói tömeg) és a masszázs során kifejtett maximális nyomásból származik.

A masszázsgyót úgy tervezték, hogy akár 125 kg teljes tömegű személyeket is elbírnjon. A masszázs alatt a nyomás legfeljebb 75 kg lehet. Összességében ez 200 kg maximális munkaterhelést jelent.

Felkelés a masszázsgyóból



Sérülésveszély!

Ha helytelenül kel fel a masszázsgyóból, akkor azzal nem megfelelő terhelést gyakorol a masszázsgyóra.

Ez a masszázs felborulásához és sérüléshez vezethet.

– A felkelés során ne üljön a masszázsgyó fej. vagy láboldali végére.

1. Távolítsa el a kartámaszokat **9**, hogy elkerülje az azon való támaszkodást a felkelés közben.
2. Úgy helyezkedjen el, hogy a fekvőfelület **8** közepén üljön.
3. Lassan álljon fel.



Nem javasolt gyors mozdulatokat tenni a hosszú, nyugodt fekvést követően, mert a vérkeringésnek először alkalmazkodnia kell.

A masszázság összehajtása



Sérülésveszély!

A nem megfelelő használat esetén sérülésveszély áll fenn.

- Óvatosan fektesse a masszázságot az oldalára, és óvatosan hajtsa össze, vigyázva, hogy ne csípje be az ujjait a mozgó részek közé.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodás veszélye!

Ha nincs elegendő szabad hely a masszázság összehajtásakor, sérülést okozhat a környező bútorokban és tárgyokban.

- A masszázság összehajtásakor tartson legalább két méter távolságot minden oldalról.

1. Vegye le a kartámaszokat **9**, a párnát **1** és a fejtámasz **13** és a kéztámasz **2** keretét a masszázságról.
2. Oldja ki a rögzítőket **4** a fekvőfelület **8** mindkét oldalán (lásd a D. ábrát).
3. Fektesse a masszázságot a bal oldalára. A masszázság most a négy műanyag lábon **10** áll.
4. Az egyes alkatrészeket a gumi tartók **16** segítségével/a masszázság alatt tárolja.
5. Hajtsa vissza lassan a lábakat **3** a masszázság alá. Ügyeljen arra, hogy a drótsodrony **5** ne gabalyodjon össze, és az alkatrészek ne akadályozzák a lábakat.
6. Hajtsa össze a fekvőfelület két részét, és zárja le a reteszeket **15**. Győződjön meg róla, hogy a masszázság könnyedén záródik. Ne feszítse szét a zárat.

Sikeresen összehajtotta a masszázságot.

Takarítás és karbantartás

ÉRTESÍTÉS!

Károsodás veszélye!

A masszázsgy nem megfelelő használata az ágy károsodását okozhatja.

- Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém- vagy nylonsörtéssel készült keféket, valamint éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, például késeket, kemény spatulákat és hasonlókat. Ezek károsíthatják a felületeket.
1. Törölje le a masszázsgyat enyhén nedves ruhával, vagy szükség esetén enyhe szappannal.
 2. Ezután teljesen szárítsa meg az összes alkatrészt egy száraz, szőszmentes ruhával a masszázsgy következő használata előtt, vagy mielőtt összehajtaná és a hordtáskába **14** tenné.



Javasoljuk, hogy a makacs szennyeződések esetén tisztítóban tisztíttassa meg.

Karbantartás



Sérülésveszély!

Használat során a csavarkötések idővel meglazulhatnak.

Ha nem szorítja meg őket időben, a masszázsgy széteshet és sérülést okozhat.

- Rendszeresen szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy nem találhatók-e rajta repedések és meglazult csavarok.
- Ne használja a masszázsgyat, amíg meg nem szorította a csavarokat, és a hibás alkatrészeket szakemberrel ki nem cseréltette.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarkötések meglazultak-e és ha szükséges, húzza meg őket újra.

Tárolás

- Tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.
- Tegye be a masszázsgyát összehajtott állapotban a hordtáskába 14.
- A masszázsgyát hűvös, száraz és tiszta helyen tárolja.

Műszaki adatok

Modell: 6501030

Típusszám: 6502817

Méretetek: 2 110 × 820 × 590–800 mm

Súly: 15,7kg

Max. felhasználói súly: 125 kg

Max. munkaterhelés: 200 kg

Magasság beállítása: 590–800 mm között

Ártalmatlanítás

Csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolásból származó hulladékokat szelektíven gyűjtse. A papírt és a kartont a papírhulladék közé dobja, a fóliákat pedig az újrahasznosítható anyagok gyűjtőjébe.

A masszázsgyát ártalmatlanítása

- A masszázsgyát az adott országban, illetve régióban érvényes jogszabályoknak és törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa.





HU

Származási hely: Kína

Gyártó:

Woolf Sports Promotion GmbH & Co KG

Straniakstraße 4

5020 Salzburg

Austria

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

821154



HU +36 1 808 8086



service-Woolf-HU@sertronics.de

MODELL:

6501030

01/2023

3

**ÉV
JÓTÁLLÁS**