



Használati útmutató



IZOMPÓLYA- MASSÁZSPISZTOLY



Tartalomjegyzék

1. Általános tudnivalók	3
2. Alkalmazott szimbólumok	3
3. Rendeltetésszerű használat	5
4. Biztonsági tudnivalók	5
5. A csomag tartalma	8
6. A csomag tartalmának ellenőrzése	9
7. Az akkumulátor feltöltése.....	10
8. A masszírozóeszköz használata	10
9. Alkalmazási területek	12
10. Tisztítás és karbantartás	14
11. Tárolás	14
12. Ártalmatlanítási tudnivalók	14
13. Műszaki adatok	16

Általános tudnivalók



Az első használat előtt, kérjük, gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót, különös figyelmet fordítva a biztonsági tudnivalókra, és csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja az izompólya-masszázsasztalt.

A következő útmutatások be nem tartása súlyos sérüléseket okozhat. A használati útmutató az izompólya-masszázsasztal elválaszthatatlan részét képezi. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználás céljából; ha továbbadja az izompólya-masszázsasztalt egy másik felhasználónak, akkor mellékelje a használati útmutatót is. A használati útmutató ügyfélszolgálatunknál PDF-fájlként is beszerezhető. Ehhez forduljon a gyártóhoz a garancialapon megadott szervizcímen. A jobb olvashatóság érdekében az izompólya-masszázsasztalt a továbbiakban egyszerűen masszírozóeszközként említjük.

Alkalmazott szimbólumok

A használati útmutatóban, a masszírozóeszközhöz és a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



A használat előtt vegye figyelembe az útmutatót!



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



VIGYÁZAT!

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet, ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.



Ez a jelölés hasznos kiegészítő információkra és tanácsokra utal.



A leselejtezett készülékeket ne kezelje háztartási hulladékként (lásd „Ártalmatlanítási tudnivalók” c. fejezet).



Az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba (lásd „Hulladékkezelés” c. fejezet).



Megfelelőségi nyilatkozat: Az ezzel a jellel jelölt árucikkek megfelelnek az EU-irányelvek követelményeinek. A teljes megfelelőségi nyilatkozatot a garanciakártyán megadott szervizcímen kérheti le.



Az ezzel a szimbólummal jelölt árucikkek kizárólag beltéri felhasználásra alkalmasak.



Ez a szimbólum egyenárammal üzemeltethető árucikkeket jelöl.



Gyártási dátum



Ez a szimbólum a lítium-ion akkumulátorral ellátott veszélyes árukat jelzi.

Rendeltetésszerű használat

A masszírozóeszközt saját masszírozásra terveztük, és arra szolgál, hogy ellazítsa a test feszült és megkeményedett pontjait. A különböző masszírozófejek az egyes testtájak, pl. váll, karok, lábszárak és hát masszírozására alkalmasak. A masszírozóeszköz gyógyászati és terápiás célokra, valamint iparszerű használatra nem alkalmas. A masszírozóeszköz nem játékszer. A masszírozóeszközt kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkért.

Biztonsági tudnivalók



Áramütés veszélye!

- A masszírozóeszközt csak száraz beltéri helyiségekben használja.
- Ne használja a masszírozóeszközt úgy, hogy az vízzel feltöltött fürdőkádba vagy mosdókagylóba eshessen.
- Nem merítse a masszírozóeszközt vízbe vagy más folyadékba.
- Rendszeresen ellenőrizze az masszírozóeszköz esetleges sérüléseit és kopását. Károsodások esetében ne használja a masszírozóeszközt, hanem forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- Ne végezzen semmilyen módosítást a masszírozóeszközön.
- Soha ne kísérelje meg a masszírozóeszköz felnyitását.
- Tartsa távol a masszírozóeszközt a nyílt lángtól és forró felületektől.
- A masszírozóeszközt soha ne tegye ki magas hőmérsékleti hatásoknak (pl. fűtés, napsugárzás) vagy időjárás hatásoknak (pl. eső stb.).
- Gondoskodjon róla, hogy gyermekek ne dughassanak semmit a masszírozóeszközbe.

- Ha nem használja a masszírozóeszközt, éppen tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel, akkor kapcsolja ki a masszírozóeszközt.
- Az akkumulátorok tartósan be vannak építve a masszírozóeszközbe és nem cserélhetők. Soha ne kísérelje meg felnyitni a masszírozóeszközt és hozzáférni az akkumulátorokhoz.
- A masszírozóeszköz elemeket tartalmaz, amelyek nem cserélhetők ki. Soha ne kísérelje meg a masszírozóeszköz felnyitását az elemekhez való hozzáférés céljából.



FIGYELMEZTETÉS! Veszélyes a gyermekekre, a korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyekre (pl. bizonyos fogyatékkal élők, korlátozott fizikai és mentális képességű idős emberek), vagy a kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyekre (például nagyobb gyermekekre).

- A masszírozóeszközt 8 év feletti gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában, illetve akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, illetve csak akkor, ha elmagyarázták nekik a masszírozóeszköz biztonságos használatát, és tisztában vannak a hozzá kapcsolódó veszélyekkel.
- Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.
- Ne engedje, hogy gyermekek a masszírozóeszközzel és a csomagolás részeivel játsszanak.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a masszírozóeszközt, ha az üzemben van.



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

- Ne használja a masszírozóeszközt a következő testrészek: nyak, nemi szervek környéke, fej, szem, fül, vese, mellkas, karhajlatok, hónalj, lágyéktáj és térdhajlatok.
- Ne használja a masszírozóeszközt közvetlenül a csontokon.
- Ne használja a masszírozóeszközt sérült, fájó vagy érzékeny testrészek, pl. bőrbetegségek esetén, sebeknél vagy napozási leégés esetén.
- Hagyja abba a masszázst, ha közben fájdalom lép fel vagy rosszul érzi magát.



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Az alábbi esetekben ne használja a masszírozóeszközt vagy a masszírozóeszköz használata előtt kérdezze meg orvosát:

- orvosi implantátumok vagy szívritmus-szabályozó esetén,
- a véredények megbetegedései, vérkeringési zavarok, csonttritkulás, trombózishajlam, cukorbetegség, magas vérnyomás, idegi irritációk esetén
- lázas megbetegedések esetén,
- várandósság esetén



ÉRTESÍTÉS!

Kerülje el az anyagi károkat.

- Ne használja és ne tárolja a hűsítőgéles masszázsfejet 5 °C alatti vagy 45 °C feletti hőmérsékleten. A benne található gél megfagyhat, illetve nagyon felforrósodhat és elfolyósodhat, ezáltal elveszítheti hűsítő hatását.
- Ne használja tovább a hűsítőgéles masszázsfejet, ha az sérült, vagy kifolyik belőle a gél.

A csomag tartalma / alkatrészek megnevezése

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 Masszírozóeszköz | 8 Villa masszírozófej |
| 2 Töltőkábel | 9 Lapos masszírozófej |
| 3 Csatlakozóaljzat | 10 Gömb masszírozófej |
| 4 Szerkezet masszírozófejekhez | 11 Kúpos masszírozófej |
| 5 Kijelző | 12 Marok masszírozófej |
| a Akkumulátorkijelző | 13 Íves masszírozófej |
| b Sebességekijelző | 14 Csillapított masszírozófej |
| 6 Beállító kerék | 15 Hüvelykujj masszírozófej |
| 7 Főkapcsoló | 16 Hűsítőgéles masszázsfaj |
| | 17 Tárolókoffer |
- Jótállási adatlap
Használati útmutató

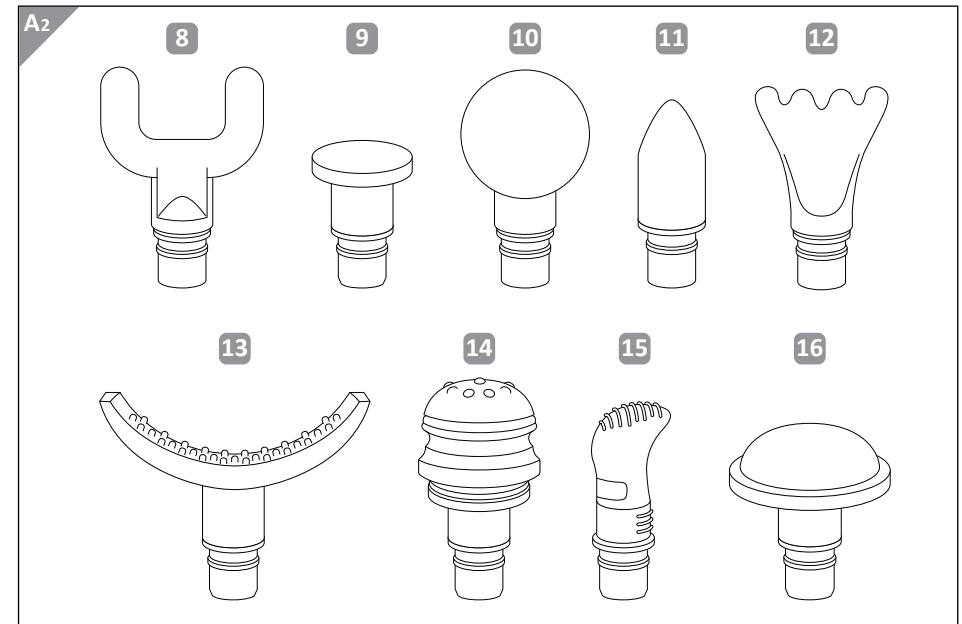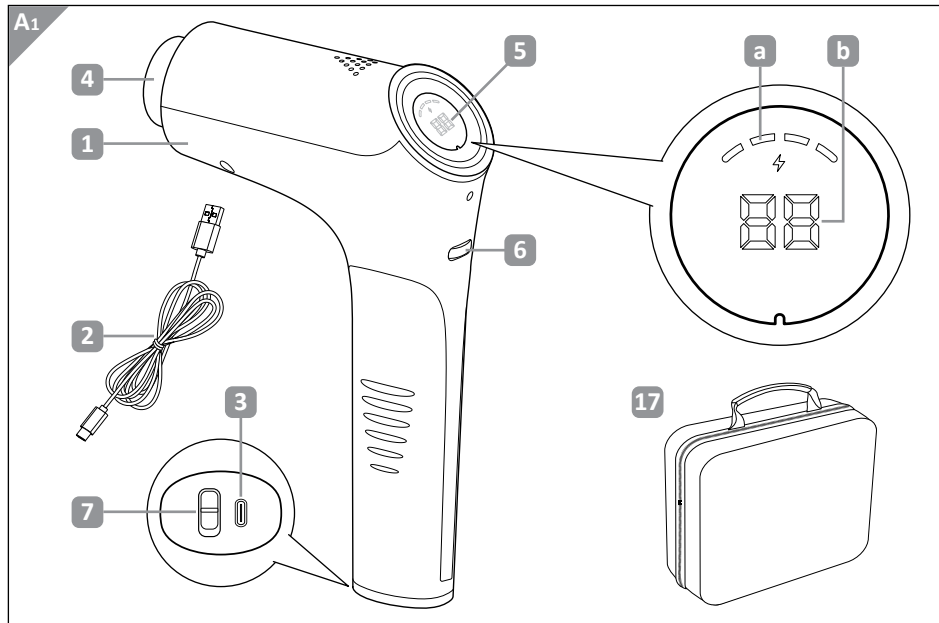

A csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Károsodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, kárt tehet a masszírozóeszközben. A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

Ellenőrizze a csomag tartalmának hiánytalanságát és a masszírozóeszköz épségét. Ha problémát tapasztal, ne használja a masszírozóeszközt. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

Az akkumulátor feltöltése

A masszírozóeszköz első használata előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Töltse fel újra az akkumulátort, ha a kijelzőn **5** megjelenik a „LO” felirat, vagy az akkumulátorkijelzőn **a** lévő sávok csökkenni kezdenek. A masszírozó nem működik a töltési folyamat alatt.

1. Csatlakoztassa a töltőkábel USB-C csatlakozóját **2** a masszírozóeszközön **3** található **1** csatlakozóaljzathoz.
2. Csatlakoztassa a töltőkábel másik végét **2** egy olyan megfelelő USB csatlakozóhoz, amelyet a hálózati áramellátásra csatlakoztat (II. védelmi osztályú tápegység, 5 V-os / 2 A-es hálózati adapter; a csomag nem tartalmazza). Megkezdődik az akkumulátor feltöltése. Az akkumulátor-kijelző villog. A masszírozóeszköz a töltési folyamat közben nem használható.
3. Amikor a masszírozóeszköz fel van töltve, az akkumulátorkijelző folyamatosan világít.
4. Válassza le a töltőkábelt az elektromos hálózatról és a masszírozóeszköztől.

A masszírozóeszköz használata



Sérülésveszély!

- A túl sokáig tartó masszázs az izmok túlzott stimulációját és merevségét okozhatja. Ne használja a masszírozóeszközt egyszerre 15 percnél hosszabb ideig.

Masszírozófejek felhelyezése / cseréje

A masszírozóeszköz 9 különböző masszírozófejjel rendelkezik a különféle alkalmazási területekhez. Ehhez vegye figyelembe az „Alkalmazási területek” című fejezetben feltüntetett ábrát. Ebből megállapíthatja, hogy mely testrészek kezelésére melyik masszírozófej alkalmas.


1. Dugja a kívánt masszírozófejet **8** – **16** a masszírozóeszközön **4** található **1** szerkezetre.
2. Ha el szeretné távolítani a masszírozófejet, húzza le a szerkezetről.

Be- és kikapcsolás

1. A masszírozóeszköz **1** bekapcsolásához csúsztassa el a főkapcsolót **7** a masszírozóeszköz alján. A kijelző világít.
2. A masszírozóeszköz elindításához forgassa el a kis beállító kereket **6**. A kijelzőn található sebességekijelző **b** a masszázs intenzitását mutatja (1 és 20 közötti érték).
3. Nyomja meg a kis beállító kereket a masszázs szüneteltetéséhez.
4. Nyomja meg újra a kis beállító kereket, ha a masszázst az utoljára beállított intenzitással kívánja folytatni.
5. Az intenzitás 0-ra való visszaállításához tartsa nyomva a kis beállító kereket 1,5 másodpercig.





Ha nem történik további kezelés, akkor a masszírozóeszköz 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

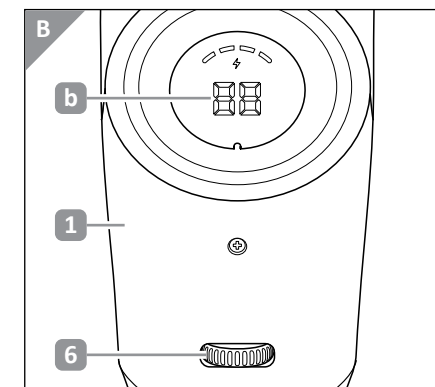

A hűsítőgéles masszázsfej használata

1. Használat előtt helyezze be a hűsítőgéles masszázsfejet a hűtőszekrénybe.
2. Ha a hűsítőgéles masszázsfej elért egy kellemes hőmérsékletet, helyezze fel a masszírozóeszköze.
3. Most már használatba veheti a masszírozóeszközt. Ha a hűsítőgéles masszázsfej használata kényelmetlenné válik, vagy túlságosan lehűl, hagyja abba a használatát. Várja meg, amíg a hűsítőgéles masszázsfej kissé felmelegszik.

Alkalmazási területek

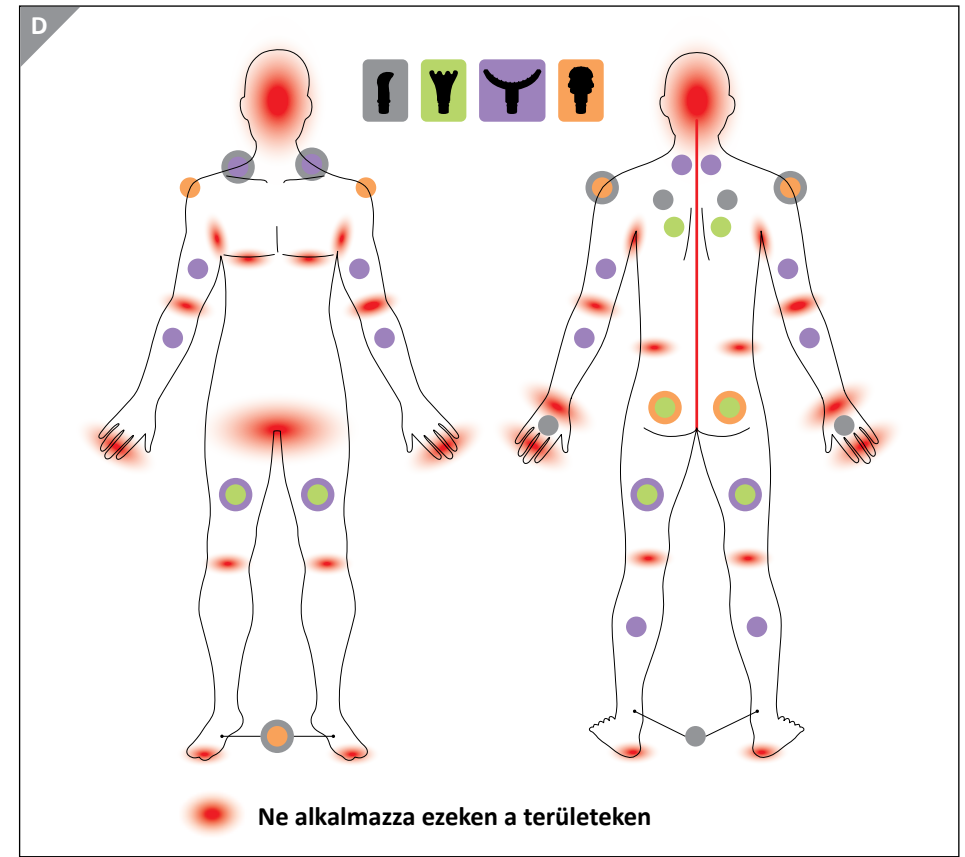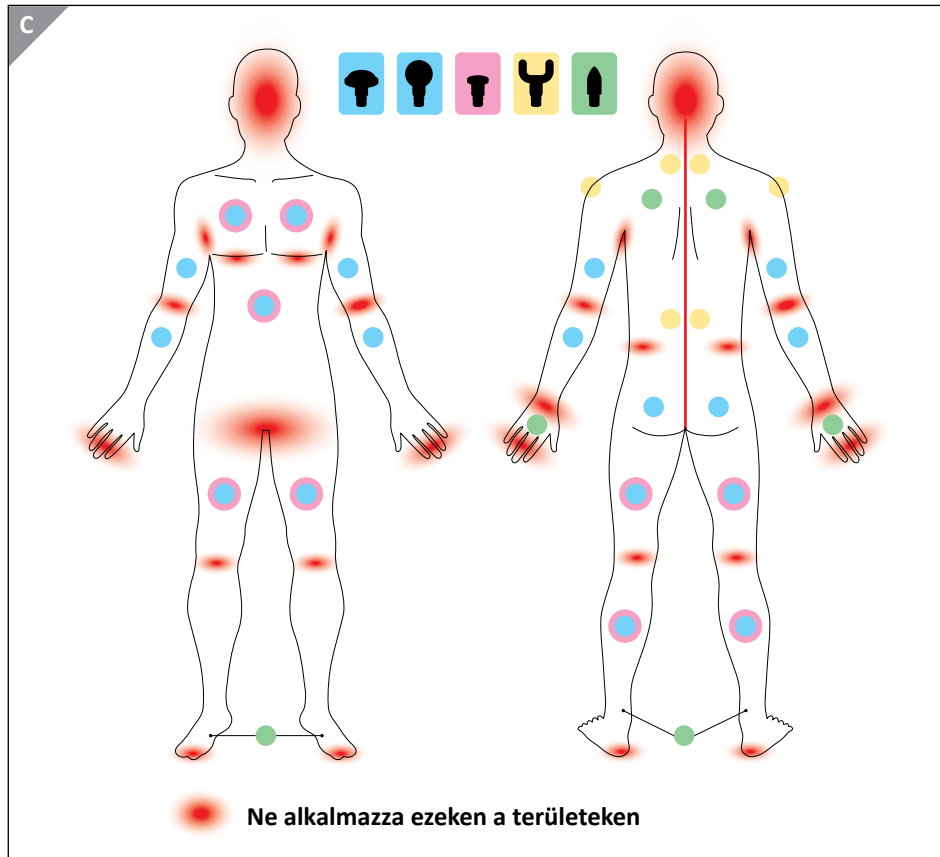

Tisztítás és karbantartás

Minden tisztítás előtt válassza le a masszírozóeszközt az elektromos hálózatról. A masszírozóeszköz külső felületét puha, enyhén benedvesített törölkendővel tisztítsa meg. Ezután az újbóli használat előtt hagyja a teljesen megszáradni masszírozóeszközt. Rendszeresen ellenőrizze a masszírozóeszköz esetleges sérüléseit és kopását, és károsodások esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz. Ne végezzen semmilyen módosítást a masszírozóeszközön. A LED-ek nem cserélhetők. A masszírozóeszköz hibás LED-ekkel is tovább üzemeltethető.

Tárolás

A masszírozóeszközt a mellékelt tárolótáskában, száraz, jól szellőző helyen tárolja. Óvja a masszírozóeszközt a fagytól és a közvetlen napsugárzástól. A masszírozóeszközt gyermekek elől elzárt helyen tárolja.

Ártalmatlanítási tudnivalók

Csomagolás

Valamennyi csomagolóanyag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalaton, ill. az illetékes kommunális intézményen keresztül, a hatályos előírások szerint kerülhet a hulladékba. A hulladékkezelő vállalat munkatársai érdeklődés esetén tájékoztatást adnak a helyes és környezetbarát hulladékkezelés lehetőségeiről.

Régi készülékek



Az áthúzott kerek szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A fogyasztókat törvény kötelezi arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket hasznos élettartamuk végén a szétválogatatlan települési hulladéktól elkülönítve gyűjtsék. Ezzel

biztosítható a környezetbarát és erőforrás-kímélő újrahasznosítás. Azokat az elemeket és akkumulátorokat a gyűjtőhelyre történő leadás előtt le kell választani a készülékről és a kijelölt hulladékgyűjtő helyre kell vinni, amelyeket elektromos vagy elektronikus készülék nem foglal magába és amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók. Ugyanez vonatkozik azokra a lámpákra is, amelyek roncsolásmentesen eltávolíthatók a készülékből.

A magánháztartásból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a WEEE 2012/19-es előírásainak megfelelően a hulladékkezelő vállalatok gyűjtőhelyein, vagy a gyártók ill. forgalmazók által kialakított gyűjtőhelyeken adhatják le azokat. A régi készülékek leadása díjtalan. Az elektromos és elektronikus berendezéseket a legalább 400 m²-es eladótérrel rendelkező kereskedők kötelesek visszavenni. Ugyancsak kötelesek visszavenni az elektromos és elektronikus berendezések számára legalább 400 m²-es raktárterülettel rendelkező távértékesítő kereskedők. A forgalmazók észszerű távolságon belül biztosított megfelelő visszaküldési lehetőség biztosításával általában kötelesek gondoskodni a régi készülékek díjmentes visszavételéről. A fogyasztóknak lehetőségük van régi készüléket díjmentesen leadni a forgalmazónál, aki köteles azt visszavenni, ha Ön új, azonos értékű, lényegében azonos funkciójú készüléket vásárol. Ez a lehetőség magánháztartásba történő szállítás esetén is fennáll. A forgalmazó az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megkérdezni a fogyasztót a visszaadási szándékról.

Ezen túlmenően a fogyasztók a régi készülékeket ingyenesen leadhatják a forgalmazó gyűjtőhelyén, aki köteles azokat visszavenni, anélkül, hogy ez új készülék vásárlásához kapcsolódna. Az egyes eszközök élhossza azonban nem haladhatja meg a 25 cm-t.

Elemek



AAz elemek és akkumulátorok nem dobhatók a háztartási hulladékba. A fogyasztók törvényileg kötelesek szelektíven ártalmatlanítani az elemeket és akkumulátorokat. Az elemek és akkumulátorok ingyenesen leadhatók az Önközségének/városrészének gyűjtőhelyén, illetve kereskedelmi

helyeken annak érdekében, hogy környezetbarát ártalmatlanításukról és az értékes nyersanyagok újrahasznosításáról gondoskodhassanak. Szakszerűtlen ártalmatlanításuk esetén mérgező anyagok juthatnak a környezetbe, amelyek ártalmas hatást gyakorolhatnak emberekre, állatokra és növényekre. Az elektromos készülékekben található elemeket és akkumulátorokat lehetőség szerint a készüléktől külön kell ártalmatlanítani. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le. Lehetőség szerint az egyszer használatos elemek helyett használjon inkább újratölthető elemeket.

Lítiumtartalmú elemek és akkumulátorok esetén a leadás előtt ragassza le a pólusokat a külső rövidzárlat megelőzése érdekében.

A rövidzárlat tűzhez vagy robbanáshoz vezethet. A magas károsanyag-tartalmú elemek az alábbi jelölésekkel vannak ellátva:

Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Műszaki adatok

Lítiumion-akkumulátor: 14,8 V  , 1500 mAh, 22,2 Wh

Motorfordulatszám: 900–3000 ford./perc

USB-bemenet: 5 V 

Questo prodotto viene fornito con batterie al litio installate permanentemente dal produttore Jinhua Huaqiang Electronic Technology Co.,Ltd.

Responsabile UE per il regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542:

aspiria nonfood GmbH

Lademannbogen 21-23

22339 Hamburg, Germany

+49 (0) 40 88 94 160

info@aspiria-nonfood.de



Állapot: 2024-06



Származási hely: Kína

Gyártó:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG, GERMANY
www.aspiria-service.de

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

836862

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
ANS-24-014

10/2024

3

**ÉV
JÓTÁLLÁS**