



Istruzioni
per l'uso



PISTOLA MASSAG- GIANTE PER LE FASCE MUSCOLARI



Indice

1. Informazioni generali	3
2. Simboli utilizzati	3
3. Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	5
4. Avvertenze di sicurezza.....	5
5. Contenuto della fornitura	8
6. Controllo del contenuto della fornitura	9
7. Ricarica della batteria	10
8. Utilizzo del massaggiatore	10
9. Aree di utilizzo.....	12
10. Pulizia e manutenzione	14
11. Conservazione.....	14
12. Indicazioni per lo smaltimento	14
13. Dati tecnici	16

Informazioni generali



Prima del primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza, e utilizzare la pistola massaggiante per le fasce muscolari soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze può causare lesioni gravi. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante della pistola massaggiante per le fasce muscolari. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione della pistola massaggiante per le fasce muscolari a terzi, consegnare anche le istruzioni per l'uso. Le presenti istruzioni per l'uso possono essere richieste anche in formato PDF al nostro Servizio Clienti. Contattare l'indirizzo del Servizio Clienti riportato nella scheda di garanzia. Per facilitare la lettura, la pistola massaggiante per le fasce muscolari sarà di seguito definita "massaggiatore".

Simboli utilizzati

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sul massaggiatore e sulla confezione sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole di avvertimento.



Leggere le istruzioni prima dell'utilizzo!



AVVERTENZA!

Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può causare lesioni di lieve o di media entità.

AVVISO!

Questa parola di avvertimento indica la possibilità di danni materiali.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni e consigli utili.



Non smaltire le apparecchiature dismesse insieme ai rifiuti domestici (vedere capitolo "Indicazioni per lo smaltimento").



Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici (vedere capitolo "Indicazioni per lo smaltimento").



Dichiarazione di conformità: I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutti i requisiti definiti dalle direttive UE. La versione integrale della Dichiarazione di conformità può essere richiesta al Servizio Clienti rivolgendosi all'indirizzo indicato nella scheda di garanzia.



Gli articoli contrassegnati con questo simbolo devono essere utilizzati solo in ambienti interni.



I prodotti contrassegnati da questo simbolo funzionano a corrente continua.



Data di produzione



Questo simbolo contraddistingue una merce pericolosa con una batteria agli ioni di litio.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il massaggiatore è stato progettato per l'automassaggio e serve per alleviare le tensioni e l'irrigidimento. Le diverse teste massaggianti sono adatte a massaggiare differenti parti del corpo come spalle, braccia, gambe e schiena. Il massaggiatore non è adatto all'utilizzo in ambito medico, terapeutico o commerciale. Il massaggiatore non è un giocattolo. Utilizzare il massaggiatore esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per i danni causati da un utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d'uso.

Avvertenze di sicurezza



AVVERTENZA!

Pericolo di scosse elettriche!

- Utilizzare il massaggiatore solo in ambienti interni asciutti.
- Utilizzare il massaggiatore in modo tale che non possa cadere in una vasca da bagno riempita d'acqua o in un lavandino.
- Non immergere il massaggiatore in acqua o in altri liquidi.
- Controllare regolarmente che il massaggiatore non presenti danni. In caso di danni, non utilizzare il massaggiatore e rivolgersi al nostro Servizio Clienti.
- Non apportare modifiche al massaggiatore.
- Non provare ad aprire il massaggiatore.
- Tenere il massaggiatore lontano da fiamme libere e superfici calde.

- Non esporre mai il massaggiatore a temperature elevate (ad es. riscaldamento, raggi solari) o agenti atmosferici (ad es. pioggia, ecc.).
- Assicurarci che non vengano infilati oggetti nel massaggiatore.
- Se il massaggiatore non viene utilizzato, se lo si pulisce o se si verifica un malfunzionamento, è necessario spegnerlo.
- Le batterie sono già inserite nel massaggiatore e non devono essere cambiate. Non tentare mai di aprire il massaggiatore per arrivare alle batterie.
- Il massaggiatore contiene batterie non sostituibili. Non provare ad aprire il massaggiatore per accedere alle batterie.

AVVERTENZA!

Pericoli per bambini, persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali (ad es. persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità fisiche e mentali) o prive di esperienza e competenza (ad es. bambini grandi).

- Il massaggiatore può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sull'uso sicuro del massaggiatore e abbiano compreso i pericoli che ne derivano.
- La pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non permettere ai bambini di giocare con il massaggiatore o con i componenti della confezione.
- Non lasciare mai il massaggiatore incustodito durante il funzionamento.

AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

- Non utilizzare il massaggiatore sulle seguenti parti del corpo: collo, genitali, testa, occhi, orecchie, reni, seno, piega del gomito, ascelle, regione inguinali e poplite.
- Non utilizzare il massaggiatore direttamente sulle ossa.
- Non utilizzare il massaggiatore su parti del corpo lesionate, dolenti o sensibili, ad es. su zone affette da malattie dermatologiche, ferite o scottature solari.
- Interrompere il massaggio se si avverte dolore o non ci si sente bene.

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

Non utilizzare il massaggiatore nei seguenti casi oppure domandare al proprio medico prima di utilizzare il massaggiatore:

- se sono presenti dispositivi medici impiantati o pacemaker
- in caso di patologie vascolari, irrorazione sanguigna, osteoporosi, trombofilia, diabete, pressione alta, infiammazione dei nervi
- in caso di stati febbrili
- in caso di gravidanza



AVVISO!

Prevenzione di danni materiali.

- Non utilizzare o conservare la testina massaggiante con gel rinfrescante a temperature inferiori a 5 °C o superiori a 40 °C. Il gel che contiene potrebbe congelare o diventare molto caldo o liquefarsi, perdendo così il suo effetto refrigerante.
- Non utilizzare la testina massaggiante con gel rinfrescante se è danneggiata o perde gel.

Contenuto della fornitura / Descrizione dei componenti

- | | |
|---|---|
| 1 Massaggiatore | 8 Testa massaggiante a forchetta |
| 2 Cavo di ricarica | 9 Testa massaggiante piatta |
| 3 Presa di collegamento | 10 Testa massaggiante a sfera |
| 4 Meccanismo per le teste massaggianti | 11 Testa massaggiante a cono |
| 5 Display | 12 Testa massaggiante a pugno |
| a Indicatore della batteria | 13 Testa massaggiante ad arco |
| b Indicatore della velocità | 14 Testa massaggiante ammortizzata |
| 6 Rotella di regolazione | 15 Testa massaggiante a pollice |
| 7 Interruttore di accensione/spegnimento | 16 Testina massaggiante con gel rinfrescante |
| | 17 Confezione per la conservazione |
- Scheda di garanzia
Istruzioni per l'uso

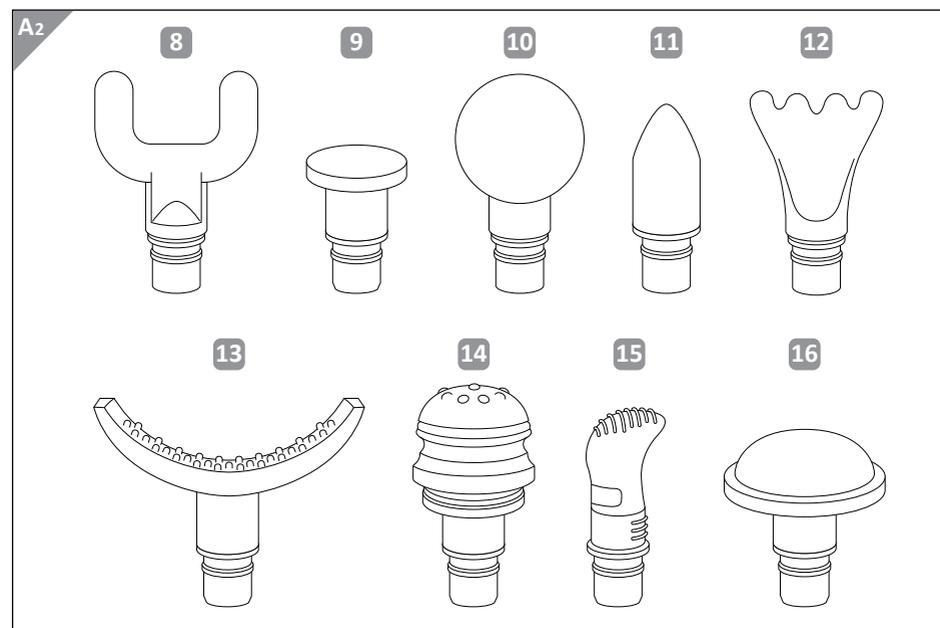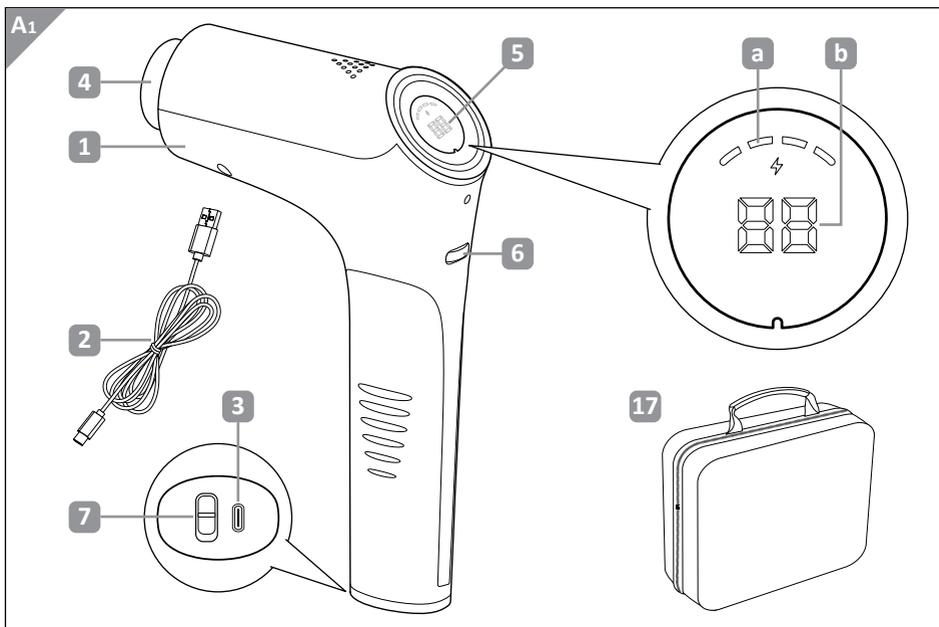

Controllo del contenuto della fornitura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aperto incautamente la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti si rischia di danneggiare il massaggiatore. Procedere con cautela durante l'apertura della confezione.

Controllare che il contenuto della fornitura sia completo e che il massaggiatore non presenti danni. Se fosse danneggiato, non utilizzare il massaggiatore, ma Contattare il produttore tramite il Servizio Clienti all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Ricarica della batteria

Prima del primo utilizzo del massaggiatore, occorre caricare completamente la batteria. Rimettere in carica la batteria quando il display **5** mostra "LO" o le barre dell'indicatore della batteria **a** diminuiscono. Il massaggiatore non funziona durante il processo di ricarica.

1. Collegare il connettore USB-C del cavo di ricarica **2** alla presa di collegamento **3** del massaggiatore **1**.
2. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica **2** a una porta USB di un adattatore di corrente USB adatto, da collegare alla rete elettrica (Alimentatore di classe di protezione II, 5 V / 2 A; non incluso nel contenuto della fornitura). La batteria inizia a caricarsi. L'indicatore della batteria lampeggia. Non è consentito utilizzare il massaggiatore durante il processo di ricarica.
3. Quando il massaggiatore è carico, l'indicatore della batteria si accende continuamente.
4. Scollegare il cavo di ricarica dalla presa di corrente e dal massaggiatore.

Utilizzo del massaggiatore



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

- Un massaggio troppo lungo può stimolare eccessivamente i muscoli e causare tensioni. Non utilizzare il massaggiatore per più di 15 minuti consecutivi.

Applicazione/sostituzione delle teste massaggianti

Il massaggiatore dispone di 9 diverse testine massaggianti da utilizzare su aree diverse. Fare riferimento all'illustrazione riportata nel capitolo "Aree di utilizzo". Da lì si capisce a quali aree del corpo sono adatte le varie testine massaggianti.


1. Inserire la testa massaggiante desiderata **8** - **16** sul meccanismo **4** del massaggiatore **1**.
2. Per rimuovere una testina massaggiante, sfilarla dal meccanismo.

Accensione e spegnimento

1. Per accendere il massaggiatore **1**, far scorrere l'interruttore di accensione/spegnimento **7** sul lato inferiore del massaggiatore. Il display si illumina.
2. Per avviare il massaggiatore, girare la rotella di regolazione **6**. Il display mostra l'intensità **b** del massaggio da 1 a 20 sull'indicatore della velocità.
3. Premere la rotella di regolazione per mettere in pausa il massaggio.
4. Premere nuovamente la rotella di regolazione per continuare il massaggio nell'ultima intensità impostata.
5. Premere la rotella di regolazione per 1,5 secondi per impostare nuovamente su 0 l'intensità.





Se non viene intrapresa alcuna azione, il massaggiatore si spegne automaticamente dopo 15 minuti.

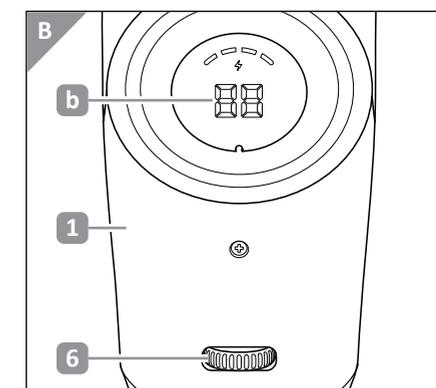

Utilizzo della testina massaggiante con gel rinfrescante

1. Prima dell'uso, riporre la testina massaggiante con gel rinfrescante in frigorifero.
2. Quando la testina massaggiante con gel rinfrescante ha raggiunto una temperatura confortevole, posizionarla sul massaggiatore.
3. Ora è possibile usare il massaggiatore. Se la testina massaggiante con gel rinfrescante risulta scomoda o troppo fredda, interrompere l'uso. Attendere che la testina massaggiante con gel rinfrescante si sia leggermente riscaldata.

Aree di utilizzo

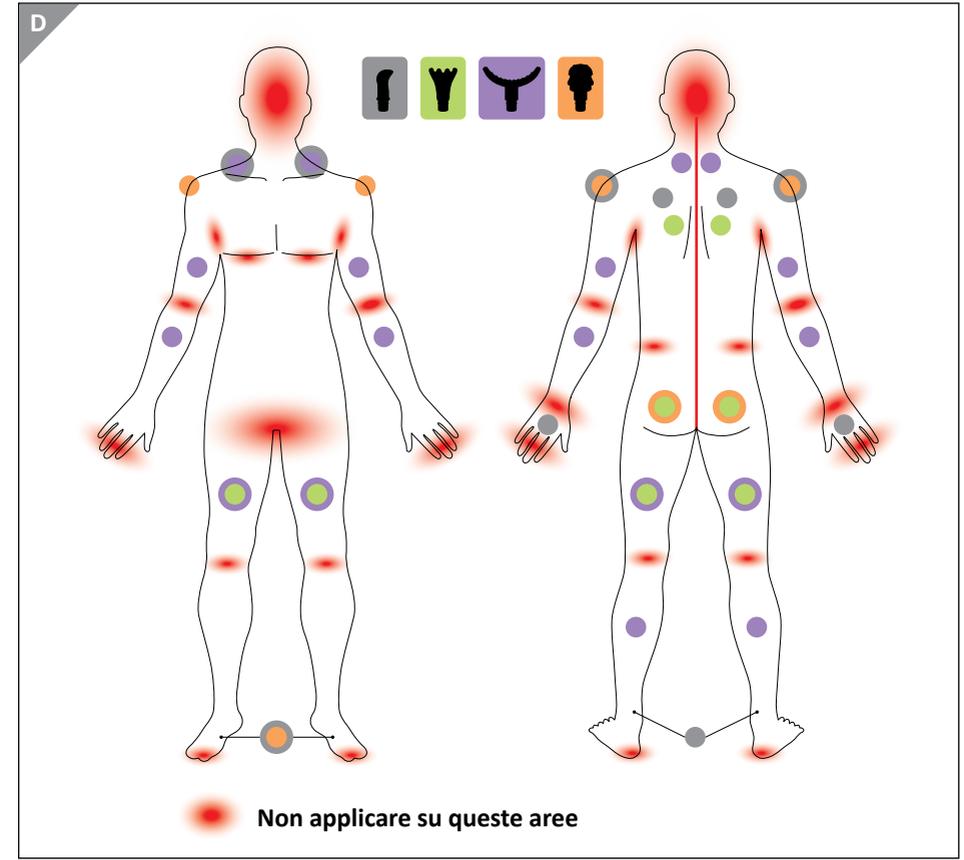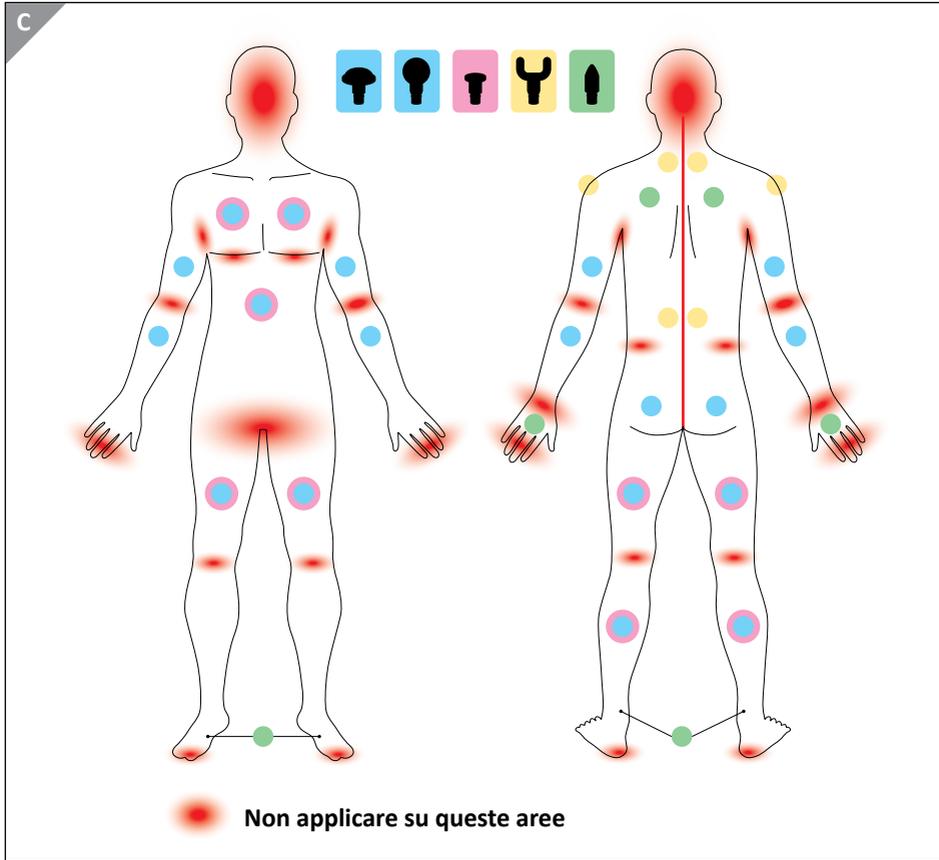

Pulizia e manutenzione

Scollegare il massaggiatore dalla rete elettrica prima di ogni pulizia. Pulire la superficie esterna del massaggiatore con un panno morbido e leggermente inumidito. Far asciugare completamente il massaggiatore prima di riutilizzarlo.

Verificare regolarmente che il massaggiatore non sia danneggiato e che non presenti segni d'usura. In caso di danni rivolgersi al Servizio Clienti. Non apportare modifiche al massaggiatore. I LED non possono essere sostituiti. Il massaggiatore è utilizzabile anche se alcuni LED sono guasti.

Conservazione

Conservare il massaggiatore nella sua custodia in un luogo asciutto e ben ventilato. Proteggere il massaggiatore dal gelo e dalla luce solare diretta. Conservare il massaggiatore fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni per lo smaltimento

Imballaggio

Tutti i componenti dell'imballaggio possono essere smaltiti conformemente alle normative vigenti tramite un'azienda di smaltimento rifiuti autorizzata o l'ente municipale a ciò preposto. Contattare il personale dell'ente preposto allo smaltimento dei rifiuti per informarsi sulle possibili modalità di uno smaltimento corretto ed ecosostenibile.

Apparecchiature dismesse



Il simbolo con la pattumiera barrata significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. In questo modo, il riciclaggio ecologico e rispettoso delle risorse è assicurato. Le batterie e gli accumulatori che non sono saldamente racchiusi nell'apparecchiatura elettrica o elettronica e che possono essere rimossi senza essere distrutti devono essere separati dall'apparecchiatura prima di consegnarli in un punto di raccolta e portarli in un punto di smaltimento previsto.

Lo stesso vale per le lampade che possono essere rimosse dall'apparecchio senza distruggerlo. I proprietari di apparecchiature elettriche ed elettroniche dei nuclei domestici possono consegnarle presso i punti di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i punti di raccolta allestiti dai produttori o dai distributori in conformità con la RAE 2012/19. La consegna dei vecchi apparecchi è gratuita. Vi è un obbligo di riconsegna per i commercianti con una superficie di vendita di almeno 400 m² per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Allo stesso modo hanno un obbligo di riconsegna i commercianti di vendita a distanza con un'area di stoccaggio di almeno 400 m² per attrezzature elettriche ed elettroniche. In generale, i distributori hanno l'obbligo di assicurare il ritiro gratuito dei RAEE fornendo strutture di ritiro adeguate a una distanza ragionevole. I consumatori hanno la possibilità di restituire gratuitamente un vecchio apparecchio a un distributore che è obbligato a riprenderlo se acquistano un nuovo apparecchio equivalente con essenzialmente la stessa funzione. Questa possibilità esiste anche per le consegne a una casa privata. Il distributore deve chiedere al consumatore al momento della conclusione del contratto di vendita l'intenzione di restituire i beni.

A parte questo, i consumatori possono consegnare gratuitamente i vecchi apparecchi in un punto di raccolta di un distributore che è obbligato a riprenderli, senza che questo sia legato all'acquisto di un nuovo apparecchio. Tuttavia, le lunghezze dei bordi dei rispettivi apparecchi non devono superare i 25 cm.

Batterie



Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati per legge a conferire le batterie e le batterie ricaricabili presso un centro di raccolta specifico. Le batterie e le batterie ricaricabili possono essere consegnate gratuitamente presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio in modo da garantire uno smaltimento ecosostenibile e il riciclaggio delle materie prime preziose. In caso di smaltimento improprio, le sostanze nocive possono finire nell'ambiente con ripercussioni negative sulla salute di persone, animali e piante. Qualora possibile, le batterie e le batterie ricaricabili contenute negli apparecchi elettrici devono essere smaltite separatamente dall'apparecchio.

Consegnare le batterie e le batterie ricaricabili soltanto se completamente scariche.
Qualora possibile, utilizzare batterie ricaricabili al posto delle batterie monouso.
Coprire con del nastro adesivo i poli delle batterie e delle batterie ricaricabili contenenti litio prima del loro smaltimento al fine di evitare un cortocircuito esterno.
Un cortocircuito potrebbe causare un incendio o un'esplosione.

Le batterie con un maggiore contenuto di sostanze inquinanti sono anche contrassegnate dai seguenti simboli:
Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Dati tecnici

Batteria ricaricabile agli ioni di litio: 14,8 V , 1500 mAh, 22,2 Wh

Velocità del motore: 900 - 3000 U/min

Ingresso USB: 5 V 

Questo prodotto viene fornito con batterie al litio installate permanentemente dal produttore Jinhua Huaqiang Electronic Technology Co.,Ltd.

Responsabile UE per il regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542:

aspiria nonfood GmbH

Lademannbogen 21-23

22339 Hamburg, Germany

+49 (0) 40 88 94 160

info@aspiria-nonfood.de



Versione: 2024-06



PRODUTTORE:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG, GERMANY
www.aspiria-service.de

ASSISTENZA POST-VENDITA

836862

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**.

MODELLO: ANS-24-014

10/2024

3

**ANNI DI
GARANZIA**