



ISTRUZIONI PER L'USO

BILANCIA MASSA GRASSA

AMBIANO



ASSISTENZA POST-VENDITA 850829

IT LA PREGHIAMO DI RECARSI NEL SUO PUNTO VENDITA ALDI

MODELLO: SF24_04618 09/2025

3 ANNI DI GARANZIA

1 INFORMAZIONI GENERALI



Il presente istruzioni per l'uso (di seguito "istruzioni") è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni relative alla messa in servizio e all'uso.

Leggere attentamente le istruzioni, in particolare il capitolo sulla **SICUREZZA**, prima di utilizzare il prodotto.

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può provocare lesioni gravi e/o danni al prodotto.

Conservare queste istruzioni per riferimento e utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni. Se si ha bisogno di una copia digitale delle istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti.

2 SICUREZZA

2.1 DESCRIZIONE DELLE AVVERTENZE

Nelle istruzioni vengono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



» Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o una lesione grave.



» Questa parola d'avvertimento mette in guardia da possibili danni a cose.



» Questo simbolo fornisce ulteriori informazioni utili riguardanti l'utilizzo.

2.2 DESCRIZIONE PITTORAMMI

Nelle istruzioni, sul prodotto stesso o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Leggere le istruzioni.



La superficie della bilancia può essere scivolosa se ci si sale con i piedi bagnati o se di per sé è umida.



Tenere le batterie fuori dalla portata dai bambini.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

2.3 AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI LESIONI!

Un utilizzo scorretto del prodotto potrebbe causare lesioni.

- » Non aprire il coperchio dell'apparecchio, bensì far eseguire la riparazione da persone qualificate. Rivolgersi ad un'officina specializzata. In caso di riparazioni eseguite in proprio, allacciamento non corretto o errato utilizzo, si escludono responsabilità e diritti di garanzia.
- » Per le riparazioni, utilizzare solo componenti che corrispondono alle specifiche originali dell'apparecchio. Il presente prodotto contiene parti elettriche e meccaniche che sono indispensabili protezioni da rischi di pericolo.
- » Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi. Non utilizzarlo in ambienti umidi o sotto la pioggia.
- » Non riporre mai il prodotto in una posizione tale da cui possa cadere in una vasca o in un lavandino.
- » Non toccare mai con le mani l'apparecchio se è caduto in acqua.
- » Non inserire mai alcun tipo di oggetto nel corpo del prodotto.
- » Se non si utilizza il prodotto, se lo si pulisce o se si verifica un malfunzionamento, spegnere sempre il prodotto.
- » Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamento, se è caduto a terra o in acqua oppure se è danneggiato. Consegnare il prodotto a un centro di assistenza per l'ispezione e la riparazione.
- » Il carico massimo consentito sul prodotto è di 180 kg. Il vetro di sicurezza potrebbe rompersi e provocare lesioni.

AVVERTIMENTO! PERICOLI PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI (PER ESEMPIO PERSONE PARZIALMENTE DISABILI, PERSONE ANZIANE CON RIDOTTE CAPACITÀ PSICHICHE E MENTALI) O RIDOTTA ESPERIENZA E CONOSCENZA (PER ESEMPIO BAMBINI PIÙ GRANDI).

- » Il presente prodotto può essere utilizzato dai bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenza, solo a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sull'utilizzo sicuro del prodotto e abbiano compreso gli eventuali pericoli da esso derivanti. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- » Non lasciare mai incustodito il prodotto mentre è in funzione.
- » Sorvegliare attentamente i bambini quando si usa il prodotto nelle loro vicinanze.

AVVERTIMENTO



DALLA PORTATA DEI BAMBINI

L'ingestione può causare ustioni e morte. Già due ore dopo l'ingestione possono verificarsi lesioni gravi. Rivolgersi immediatamente a un medico.

AVVERTIMENTO! PERICOLO PER LA SALUTE!

Se bambini o animali ingoiano la batteria, ciò rappresenta un rischio elevato per la salute.

- » Non inghiottire la batteria, pericolo di lesioni.
- » Per l'uso di batterie ricaricabili occorre tener conto di quanto segue:
 - Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'apparecchio prima della ricarica.
 - Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione di un adulto.
 - Non consentire ai bambini di sostituire le batterie senza la sorveglianza di un adulto.
- » Non effettuare lavori di saldatura e brasatura nelle immediate vicinanze delle batterie.
- » Non sovraccaricare la batteria e non deformarla. Non riscaldare le batterie. Non esporre le batterie a calore eccessivo (per es. luce solare diretta).
- » Non incapsulare e/o modificare le batterie.
- » Conservare la batteria in modo che non sia a portata di bambini e animali.

- » Le batterie usate e dalle quali fuoriesce liquido devono essere smaltite tempestivamente secondo le normative vigenti.
- » Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.
- » Le batterie possono essere pericolose se ingerite. Conservare le batterie al di fuori della portata dei bambini piccoli. Se è stata ingerita una batteria, consultare immediatamente un medico.
- » Se si ritiene che sia stata ingerita una batteria, consultare immediatamente un medico.
- » In caso di uso improprio, si possono verificare perdite di liquido dalla batteria; evitare il contatto con questo liquido. Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- » Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle, gli occhi o le mucose, lavare e sciacquare immediatamente la zona interessata con acqua pulita. Se necessario, consultare un medico.

AVVERTIMENTO! PERICOLO D'ESPLOSIONE!

L'uso improprio delle batterie comporta un elevato pericolo di esplosione.

- » Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- » Sostituire le batterie esclusivamente con il medesimo tipo di batteria o comunque equivalente.
- » Inserire le batterie prestando attenzione alla polarità corretta (+/-).
- » Rimuovere le batterie usate dal prodotto e smaltirle in modo sicuro.
- » Se il prodotto deve essere conservato inutilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie.
- » Non cortocircuitare i morsetti di alimentazione.
- » Prima di inserire la batteria, assicurarsi che i contatti del vano batterie e della batteria siano asciutti, puliti e intatti. Pulire se necessario.
- » Prima di smaltire il prodotto, rimuovere la batteria.
- » Non smontare, cortocircuitare o gettare nel fuoco la batteria.
- » Se non è più possibile chiudere il vano batterie in modo sicuro, smaltire il prodotto come descritto nel capitolo **SMALTIMENTO**.

ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!

Se si utilizza il prodotto in modo non corretto, vi è un aumento del rischio di lesioni.

- » Non utilizzare il prodotto
 - » se incinta,
 - » se si indossa un pacemaker,
 - » se si è malati o febbricitanti,
 - » se le gambe sono gonfie o con edema,
 - » per i bambini sotto i 6 anni.

2.4 ULTERIORI AVVERTENZE DI SICUREZZA

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- » Collocare il prodotto su una superficie orizzontale, asciutta e sufficientemente stabile.
- » Non esporre il prodotto a temperature elevate (riscaldamento ecc.) o ad agenti atmosferici (pioggia ecc.).
- » Non salire sulla piattaforma in due o più persone.
- » Non immergere mai il prodotto e il caricabatteria in acqua o altri liquidi durante la pulizia o l'utilizzo.

V01/0425

FABBRICATO IN CINA

PRODUTTORE

ASCE - ALDI SUD Group

SUPPLY CHAIN ENTRY GMBH

MICHAEL-WALZ-GASSE 18D

5020 SALTZBURG

AUSTRIA


CS@ASCE-IMPORTS.COM

- » Per assicurare alla batteria una maggiore durata di vita utile, spegnere l'interruttore principale dopo ogni utilizzo o ricarica.

2.5 USO CONFORME

- Il prodotto è progettato esclusivamente per la misurazione del peso, dell'acqua e del grasso corporeo oltre che della massa muscolare e ossea. È destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non in ambito professionale o medico.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni a cose se non addirittura a persone. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.
- Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme all'uso previsto o all'uso scorretto.

3 PANORAMICA DEL PRODOTTO

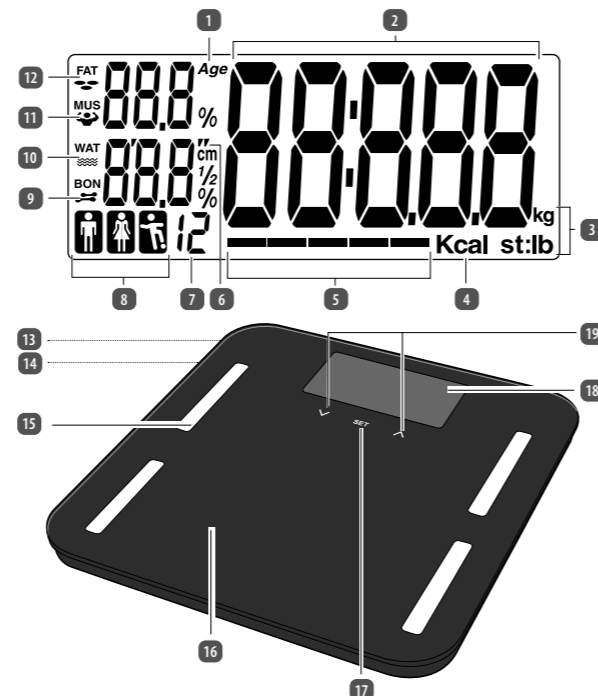

- | | |
|--|---|
| 1 Indicatore età | 11 Indicatore massa muscolare |
| 2 Indicatore del peso | 12 Indicatore percentuale di grasso corporeo |
| 3 Indicatore unità di peso | 13 Batteria |
| 4 Indicatore fabbisogno calorico | 14 Vano batterie (retro) |
| 5 Indicatore analisi del corpo | 15 Piastra in metallo |
| 6 Dimensione visualizzazione | 16 Piattaforma |
| 7 Indicatore posizione di memoria | 17 Tasto "SET" |
| 8 Indicatore sesso/modalità atleta | 18 Display |
| 9 Indicatore massa ossea | 19 Tasti freccia |
| 10 Indicatore percentuale di acqua corporea | |

4 PRIMA MESSA IN FUNZIONE

4.1 CONTROLLO DEL PRODOTTO E DELLA DOTAZIONE

ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO!

Aperto la confezione con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

- » Prestare molta attenzione durante l'apertura della confezione.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi capitolo **PANORAMICA DEL PRODOTTO**).
3. Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non utilizzare il prodotto. Contattare il servizio clienti tramite ai recapiti di contatto indicati nella pagina iniziale di queste istruzioni.

4.2 PULIZIA PRELIMINARE

1. Rimuovere l'imballaggio tutte le pellicole protettive.
2. Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, pulire tutte le parti del prodotto come descritto nel capitolo **PULIZIA E MANUTENZIONE**.

4.3 RIMUOVERE LE PELLICOLE PROTETTIVE

Rimuovere la pellicola protettiva dal vano batterie **14** tirando la linguetta per attivare il prodotto.

4.4 REGOLAZIONE DELL'UNITÀ DI PESO

1 AVVISO!

- » L'unità di peso selezionata sarà memorizzata in modo da non doverla selezionare nuovamente al successivo utilizzo.
- » L'unità di peso selezionata influenza l'unità di misura dell'altezza quando si impostano i dati personali (vedi capitolo **IMPOSTAZIONE DEI DATI PERSONALI**). Se si seleziona il chilogrammo (kg) come unità di peso, la propria altezza deve essere indicata in centimetri (cm). Se si seleziona libbra (lb) o stone (st.lb) come unità di peso, la propria altezza deve essere indicata in piedi (ft.in).

Mantenere sempre puliti i piedi e il prodotto per garantire misure accurate. È possibile selezionare chilogrammi (kg), libbra (lb) o stones (st.lb) come unità di peso.

1. Accendere il prodotto salendo sulla piattaforma **16**.
2. Scendere dalla piattaforma. Utilizzare i tasti freccia **19** per selezionare l'unità di peso desiderata (kg, lb o st.lb) e confermare la selezione con il tasto "SET" **17**.


4.5 IMPOSTAZIONE DEI DATI PERSONALI

È possibile memorizzare fino a 12 differenti gruppi di dati. Questi includono:

- Sesso
- Modalità atleta*
- Età
- Altezza del corpo

*Selezionare la modalità atleta se ci si allena come gli atleti, intensamente ogni settimana per più di 10 ore, e se si dispone di una frequenza cardiaca a riposo inferiore a 60 battiti al minuto.

1. Accendere il prodotto salendo sulla piattaforma **16**.
2. Scendere dalla piattaforma. Premere il tasto "SET" **17**, per impostare i dati personali.
3. Utilizzare i tasti freccia **19** per selezionare la posizione di memoria desiderata e confermare la selezione con il tasto "SET".
4. Quindi, premere i tasti freccia per selezionare l'opzione desiderata nelle richieste in base ai dati personali sopra menzionati e convalidare la selezione in ogni caso utilizzando il tasto "SET".

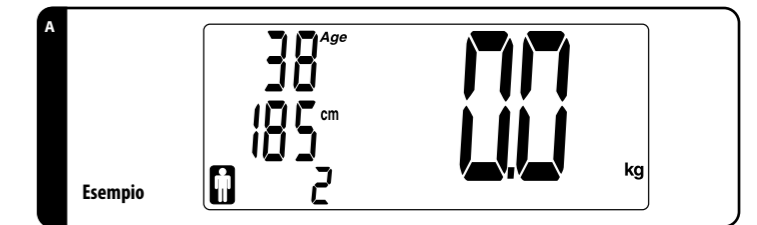

I dati personali dello spazio richiesto sono impostati (fig. A). Ora è possibile utilizzare tutte le funzioni del prodotto.

5 UTILIZZO

AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SCIVOLAMENTO!

- » Se il prodotto o i piedi sono bagnati o incrementati, si può scivolare sul prodotto e ferirsi.
- » Assicurarsi che i piedi non siano bagnati o coperti di crema.
- » Se c'è acqua sulla piattaforma del prodotto, pulire la piattaforma e asciugarla prima di utilizzare il prodotto.

5.1 INDICAZIONI SUL PROCESSO DI MISURAZIONE

- Se si esegue l'analisi del corpo direttamente dopo un pasto, possono essere visualizzati valori superiori.
- Nelle donne possono verificarsi fluttuazioni dei valori misurati nel periodo del ciclo.
- Se si perde molta acqua dopo una malattia o dopo lo sforzo fisico, i valori di misura possono essere falsati. Attendere almeno 8 ore prima di eseguire l'analisi del corpo.

