



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TESTZSÍR MÉRLEG

AMBIANO



JAVÍTÓSZOLGÁLATI HOTLINE	851209
 KÉRJÜK FORDULJON A MAGYARORSZÁGI ALDI ÁRUHÁZAKHOZ.	
A FOGYASZTÁSI CÍKK TÍPUSA: BF25_01484	01/2026

3
ÉV JÓTÁLLÁS

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



Ez a használati útmutató (a továbbiakban: útmutató) a termék részét képezi, és fontos információkat tartalmaz annak üzembe helyezésével és használatával kapcsolatban.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, különösen a **Biztonság** című fejezetet.

Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és a termék károsodásához vezethet.

Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatához és hivatkozáshoz. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje az útmutatót is. Ha szüksége van az útmutató digitális másolatára, forduljon a szervizközponthoz.

2 BIZTONSÁG

2.1 MEGJEGYZÉSEK MAGYARÁZATA

Az útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- » A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

⚠ VIGYÁZAT!

- » Ez a figyelmeztetés a lehetséges anyagi károkra vonatkozik.

i ÉRTESÍTÉS

- » Ez a jel a használatról nyújt hasznos kiegészítő információkat.

2.2 JELMAGYARÁZAT

Az útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelölések kerülnek alkalmazásra:



Olvassa el az útmutatót.



A mérési felület csúszásveszélyes, ha arra nedves lábbal lép fel vagy ha maga a mérési felület nedves.



AZ ELEMELM KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS: GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT** c. részt): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.



Az itt látható jellel ellátott termékek csak beltéri területeken szabad használni.

1

2.3 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

⚠ FIGYELMEZTETÉSI SÉRÜLÉSVESZÉLY!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

- » Ne nyissa ki a készülék házt, bízta szakemberre a javítást. Forduljon szakmühelyhez. Nem érvényesíthető garancia és jótállási igény önhatalmúan végzett javításból, szakszerűtlen csatlakoztatásból és hibás kezeléssel eredő meghibásodás esetén.
- » Javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. Ebben a termékben olyan elektromos és mechanikus részesegységek találhatók, melyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- » A terméket csak beltéri helyiségekben használja. Soha ne használja nedves helyen vagy esőben.
- » Ne tegye olyan helyre a terméket, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- » Soha ne nyúljon az elektromos készülék után, ha az vízbe esett.
- » Soha ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék készülékházába.
- » Kapcsolja ki a terméket, ha nem használja, tisztítja, vagy ha üzemzavar lép fel.
- » Ne használja a terméket, ha nem rendeltetésszerűen működik, vagy ha leesett, károsodott vagy vízbe esett. Vigye el a terméket egy szervizközpontba ellenőrzés és javítás céljából.
- » A terméket max. 180 kg súllyal terhelje. A biztonsági üveg különben eltörhet és balesetet okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉSI A TERMÉK VESZÉLYES A GYERMEKEKRE ÉS A KORLÁTOZOTT FIZIKAI, ÉRZÉKELÉSI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEKRE (PÉLDÁUL AZ IDŐSEBB EMBEREKRE, ÉS AZOKRA, AKIK NINCSENEK FIZIKAI VAGY SZELLEMI KÉPESSÉGEIK TELJES BIRTOKÁBAN), VAGY AZON SZEMÉLYEKRE, AKIK NEM RENDELKEZNEK MEGFELELŐ TAPASZTALATTAL ÉS TUDÁSSAL (PÉLDÁUL A NAGYOBB GYERMEKEKRE).

- » A terméket a 8. évüket betöltött gyermekek, illetve fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan korlátozott személyek, valamint a szükséges tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy azt követően használhatják, hogy betanították őket a termék biztonságos használatára, és megértették az abból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Tisztítást és felhasználati karbantartást gyermek felügyelete nélkül elvégezni az elemesért.
- » Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.
- » Mindig gondosan felügyelje a gyermekeket, amikor a terméket a közelükben használja.


⚠ FIGYELMEZTETÉSI EGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLY!

Akut egészségügyi veszélyt jelent, ha a gyermekek vagy az állatok lenyelik az elemet.

- » Ne nyelje le az elemet, mert az égési sérülést okozhat.
- » Ha újratölthető elemet használ, vegye figyelembe a következőket:
 - Az újratölthető elemeket újratöltés előtt ki kell venni a készülékből.
 - Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad feltölteni.
 - Ne engedje gyermeknek felnőtt felügyelete nélkül elvégezni az elemesért.
- » Ne hegyessen vagy forraszon közvetlenül az elemeken.
- » Ne töltse túl és ne deformálja az elemet. Ne melegítse az elemeket. Soha ne tegye ki túlzott hőségnek az elemeket (például közvetlen napfénynek).
- » Ne burkolja be és/vagy módosítsa az elemeket.
- » Az elemet úgy tárolja, hogy ahhoz a gyermekek és állatok ne férhessenek hozzá.
- » Az elhasznált és kifolyt elemeket az érvényes irányelveknek megfelelően, azonnal selejtezze le.
- » Tartsa távol a gyermekektől az új és a használt elemeket.
- » Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Az elemeket kisgyermekektől elzárva tárolja. Ha valaki lenyel egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
- » Ha gyanúja szerint valaki mégis lenyelhetett egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
- » Nem megfelelő használat esetén az elemből folyadék szivároghat; kerülje az ezzel való érintkezést. Az elemből kijutó folyadék irritációt és égési sérüléseket okozhat.

2

3 TERMÉKÁTEKINTÉS

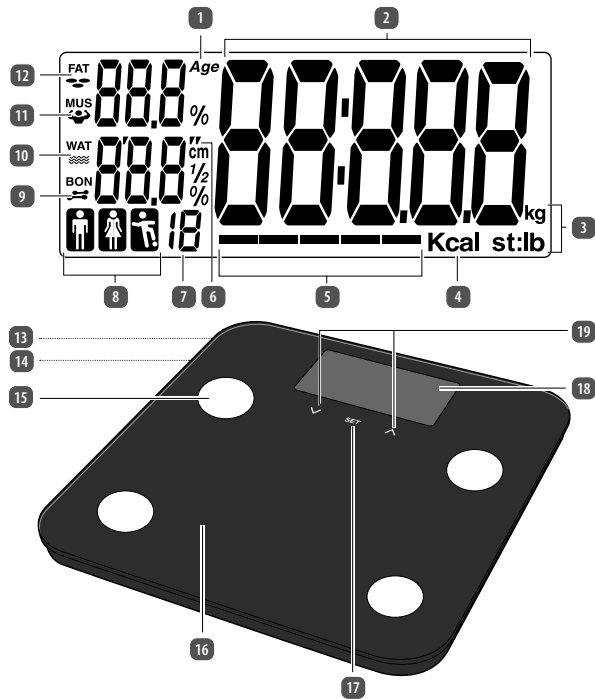

5

2.4 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VIGYÁZATI MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- » A terméket vízszintes, száraz, kellően stabil felületre helyezze.
- » A terméket soha ne tegye ki magas hőmérsékletnek (fűtőtest stb.) vagy az időjárás viszontagságainak (eső stb.).
- » Soha ne lépjen két vagy több személy a mérési felületre.
- » Soha ne merítse a terméket és a töltőt tisztítás vagy használat közben vízbe vagy más folyadékba.
- » Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében használat vagy töltés után kapcsolja ki a főkapcsolót.

2.5 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

- A terméket kizárólag a testsúly, a testben található víz- és zsírárány, valamint az izom- és csonttömeg mérésére tervezték. Kizárólag magánhasználatra való, ipari vagy orvosi célokra nem használható.
- A terméket kizárólag a jelen útmutatóban ismertetett módon használja. Bármely más használat rendeltetésellenesnek minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.
- A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkat nem vállal felelősséget.

4

- » Ha az elemfolyadék a bőrével érintkezne, illetve a szemébe vagy a nyálkahártyájára kerülne, azonnal öblítse le az érintett felületet tiszta vízzel. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
 - » Ha lenyelt, vagy fennáll annak a lehetősége, hogy lenyelt egy elemet, akkor forduljon orvoshoz, és tájékoztassa az egészségügyi hatóságokat az elem feltételezett lenyeléséről. Nem mindig ismerhető fel egyértelműen, ha egy gyermek lenyelt egy gombelmelet, mivel nincsenek specifikus tünetek. A gyermeknél azonban a következő tünetek jelentkezhetnek:
 - » köhögés, öklendezés vagy nyáladzás;
 - » gyomorrontás vagy vírusfertőzés jelei;
 - » hányás;
 - » gyomor-, mellkas- vagy torokfájdalom panaszok;
 - » fáradtság vagy bágyadság és
 - » étvágyvesztés.
- Mivel a jelek nem nyilvánvalók, fontos, hogy otthon is fokozottan figyeljünk az elérhető helyen maradt, használt vagy tartalék gombelmelekre és az azokat tartalmazó termékekre.

⚠ FIGYELMEZTETÉSI ROBBANÁSVESZÉLY!

Az elemek szakszerűtlen használata fokozott robbanásveszéllyel jár.

- » A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- » Elemcsere esetén mindig ugyanolyan vagy egyenértékű típust használjon.
- » Az elemeket helyes polaritással (+/-) kell behelyezni.
- » A használt elemeket ki kell venni a termékből, és biztonságosan ártalmatlanítani kell.
- » Ha a használaton kívüli terméket hosszabb ideig kell tárolni, akkor az elemeket el kell távolítani.
- » Az áramellátó kapcsolatot tilos rövidre zárn.
- » Az elem behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy az elemtartóban és magukon az elemeken található érintkezők szárazok, tiszták és sértetlenek. Szükség esetén tisztítsa meg őket.
- » Mielőtt leselejtezi a terméket, vegye ki belőle az elemeket.
- » Az elemet nem szabad szétbontani, rövidre zárn vagy tűzbe dobni.
- » Ha az elemtartót nem lehet biztonságosan bezárni, akkor a terméket a **LESZELEJTÉS** fejezetben taglalt információknak megfelelően selejtezze le.

VIGYÁZATI SÉRÜLÉSVESZÉLY!

A termék szakszerűtlen használata esetén fokozott sérülésveszély áll fenn.

- » Ne használja a terméket,
 - » ha terhes,
 - » ha szívritmus-szabályozót visel,
 - » ha beteg vagy lázas,
 - » ha a lábait bedagadtak vagy ödémásak,
- » 6 éven aluli gyermekek esetében.

3

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|--------------------------|
| 1 | Életkor-kijelző | 11 | Izomtömeg-kijelző |
| 2 | Súlykijelzés | 12 | Testzsírszázalék-kijelző |
| 3 | Súly mértékegységének kijelzője | 13 | Elem |
| 4 | Kalóriaszükséglet-kijelző | 14 | Elemtartó (hátnál) |
| 5 | Testelemezés-kijelző | 15 | Fémlelapok |
| 6 | Méretkijelző | 16 | Mérési felület |
| 7 | Tárhely-kijelző | 17 | „SET” gomb |
| 8 | Nem/sportoló üzemmód-kijelző | 18 | Kijelző |
| 9 | Csonttömeg-kijelző | 19 | Léptető gombok |
| 10 | Testvízarány-kijelző | | |

4 ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL

4.1 A TERMÉK ÉS A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE

VIGYÁZATI MEGHIBÁSODÁS VESZÉLYE!

Ha a csomagolást figyelmen kívül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

- » A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd a **TERMÉKÁTEKINTÉS** c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl az útmutató fedőlapiján feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

4.2 ÁLAPTISZTÍTÁS

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS** című fejezetben leírtak szerint.

4.3 A VEDŐFÓLIÁK ELTÁVOLÍTÁSA

A termék aktiválásához húzza ki a védőfóliát a nyelvénél fogva az elemtartóból **14**.

4.4 A SÚLY MÉRTÉKEGYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

i ÉRTESÍTÉS

- » Az On által kiválasztott súlyegységet a program tárolja, így azt a termék következő használatá alkalmával már nem kell újra kiválasztania.
- » A kiválasztott súlyegység befolyásolja a megadandó mértékegységet a személyi adatok beállításakor (lásd a **SZEMÉLYI ADATOK BEÁLLÍTÁSA** c. fejezetet). Ha súlyegységként a kilogrammot (kg) választotta, akkor testmagasságát centiméterben (cm) kell megadnia. Ha súlyegységként a fontot (lb) vagy a stone-t (st:lb) választotta, akkor testmagasságát (ft:in) lábban kell megadnia.

6

V01/0725

KINAI GYÁRTMÁNY

ASCE - ALDI SÜD GROUP
SUPPLY CHAIN ENHANCING GMBH
MICHAEL-WALZ-GASSE 18b,
5020 SALZBURG,
AUSTRIA
CSK@ASCE-IMPORTS.COM

ÉRTÉKESÍTŐ



