



ISTRUZIONI PER L'USO

CINTURA PER MASSAGGIO SHIATSU CON FUNZIONE TERMICA

AMBIANO



SERVICECENTER • SERVICE APRÈS-VENTE
ASSISTENZA POST-VENDITA 855034

CH BITTE WENDEN SIE SICH AN IHRE ALDI SUISSE FILIALE.
VEUILLEZ VOUS ADRESSER À VOTRE FILIALE ALDI SUISSE.
LA PREGHIAMO DI RIVOLGERSI ALLA SUA FILIALE ALDI SUISSE.

MODEL/MODELE/MODELLO:
ANS-25-101 12/2025

3
JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI GARANZIA

V1/0825

Vertrieben durch
COMMERCIALISTE PARIS
COMMERCIALIZZATO DA
LADEMANNBOGEN 21-23,
22339 HAMBURG,
GERMANY
WWW.ASPIRIA-SERVICE.DE

ASPIRIA NONFOOD GMBH



1 INFORMAZIONI GENERALI



Prima del primo utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza, e utilizzare la cintura per massaggio shiatsu con funzione termica soltanto come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. La mancata osservanza delle seguenti avvertenze può provocare gravi lesioni. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante della cintura per massaggio shiatsu con funzione termica. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultazioni future e consegnarle insieme al prodotto in caso di cessione della cintura per massaggio shiatsu con funzione termica ad altro utilizzatore.

Le presenti istruzioni per l'uso possono essere richieste anche in formato PDF al nostro Servizio Clienti. Contattare l'indirizzo indicato nella scheda di garanzia.

Per facilitare la lettura, la cintura per massaggio shiatsu con funzione termica sarà di seguito definita "massaggiatore".

2 SIMBOLI UTILIZZATI

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sul massaggiatore o sulla confezione sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole di avvertimento.



Leggere le istruzioni prima dell'uso!

⚠ AVVERTENZA!

» Questo simbolo/questa parola di avvertimento indica un pericolo di livello medio che, se non evitato, può causare la morte o gravi lesioni fisiche.

⚠ ATTENZIONE!

» Questo simbolo/questa parola di avvertimento segnala un rischio di livello basso che, se non evitato, può causare lesioni fisiche di lieve o di media entità.

1

» Assicurarsi che non vengano infilati oggetti nel massaggiatore.

» Spegnerlo il massaggiatore in caso di inutilizzo, pulizia o guasto.

» La batteria ricaricabile è installata fissa nel massaggiatore e non deve essere sostituita. Non tentare mai di aprire il massaggiatore e di accedere alla batteria.

» Il massaggiatore contiene batterie non sostituibili. Non tentare di aprire il massaggiatore per accedere alle batterie.

⚠ AVVERTENZA!

PERICOLI PER BAMBINI E PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI (AD ES. PERSONE PARZIALMENTE DISABILI, PERSONE ANZIANE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE E MENTALI) O PRIVE DI ESPERIENZA E COMPETENZA (AD ES. BAMBINI GRANDI).

» Il massaggiatore può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o prive di esperienza e competenza, a condizione che siano sotto sorveglianza o che siano stati istruiti sull'uso sicuro del massaggiatore e abbiano compreso i pericoli che ne derivano.

» La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini senza la sorveglianza di un adulto.

» Non permettere ai bambini di giocare con il massaggiatore o con i componenti della confezione.

» Non lasciare mai il massaggiatore incustodito durante il funzionamento.

⚠ ATTENZIONE!

PERICOLO DI LESIONI!

» Non utilizzare il massaggiatore in caso di ferite o dolori nella zona dorsale o cervicale.

» Non utilizzare il massaggiatore su parti del corpo lesionate, doloranti o sensibili, ad es. su zone affette da malattie dermatologiche, su testa e collo e nell'area dei genitali.

» Non utilizzare il massaggiatore in caso di patologie vascolari, osteoporosi o stati febbrili. In caso di dubbi, consultare un medico prima dell'uso.

4

AVVISO!

» Questa parola di avvertimento segnala la possibilità di danni materiali.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni e consigli utili.



Dichiarazione di conformità: gli articoli contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive UE. La versione integrale della dichiarazione di conformità può essere richiesta al Servizio Clienti rivolgendosi all'indirizzo indicato nella scheda di garanzia.



Non smaltire le apparecchiature dismesse insieme ai rifiuti domestici (vedere il capitolo "Indicazioni per lo smaltimento").



Non smaltire le batterie insieme ai rifiuti domestici (vedere il capitolo "Indicazioni per lo smaltimento").



Questo simbolo contraddistingue gli articoli elettrici appartenenti alla classe di isolamento III.



Gli articoli contrassegnati con questo simbolo sono utilizzabili solo in ambienti interni.



Gli articoli contrassegnati con questo simbolo funzionano a corrente continua.

2

» Le persone portatrici di impianti medicali o pacemaker, quelle affette da diabete o trombosi e le donne in gravidanza devono consultare il proprio medico prima di utilizzare il massaggiatore.


» Il massaggiatore è provvisto di una funzione termica. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando lo utilizzano.

AVVISO PREVENZIONE DI DANNI MATERIALI

» Se la batteria ricaricabile si scarica completamente può danneggiarsi irreversibilmente. Per evitare che la batteria si scarichi completamente, ricaricarla regolarmente anche in caso di inutilizzo. Conservare l'apparecchio a temperatura ambiente ed evitare le temperature estreme.

5 PANORAMICA DEL PRODOTTO

- 1 Massaggiatore
 - 2 Testine massaggianti
 - 3 Fodera rimovibile
 - 4 Passanti per le braccia
 - 5 Superficie riscaldante con 6 LED
 - 6 Elemento di comando
 - a Presa di collegamento USB
 - b Tasto ON/OFF
 - c Spia LED
 - d Tasto senso di rotazione
 - e Tasto intensità del massaggio (bassa-media-alta)
 - f Tasto funzione termica ON/OFF
 - 7 Cavo di ricarica
- Istruzioni per l'uso

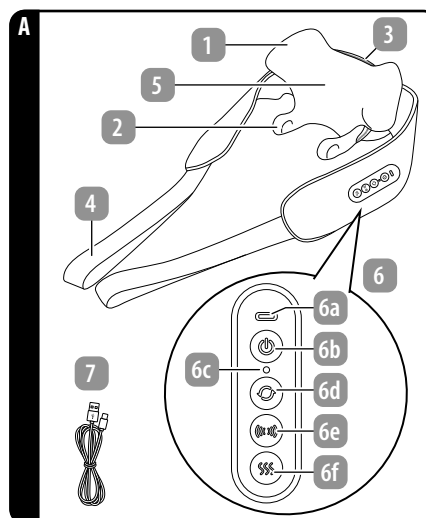

5



Data di produzione



Questo simbolo contraddistingue una merce pericolosa contenente una batteria agli ioni di litio.

3 UTILIZZO CONFORME ALLA DESTINAZIONE D'USO

Il massaggiatore è stato progettato per l'automassaggio e serve ad alleviare tensioni e irrigidimenti. È indicato per il massaggio cervicale e dorsale. Il massaggiatore non è adatto all'utilizzo in ambito medico, terapeutico o commerciale. Il massaggiatore non è un giocattolo. Utilizzare il massaggiatore esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme alle destinazioni d'uso e può causare danni materiali e persino lesioni fisiche. Il produttore o rivenditore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati da un utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d'uso.

4 AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI



AVVERTENZA!

PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE!

» Utilizzare il massaggiatore solo in ambienti interni asciutti.

» Utilizzare il massaggiatore in modo tale che non possa cadere in una vasca da bagno o un lavandino contenenti acqua.

» Non immergere il massaggiatore in acqua o in altri liquidi.

» Controllare regolarmente che il massaggiatore non presenti danni. In caso di danni non utilizzare il massaggiatore e rivolgersi al nostro Servizio Clienti.

» Non apportare modifiche al massaggiatore.

» Non provare ad aprire il massaggiatore.

» Tenere il massaggiatore lontano da fiamme libere e superfici calde.

» Non esporre mai il massaggiatore a temperature elevate (ad es. riscaldamento, raggi solari) o agenti atmosferici (ad es. pioggia ecc.).

3

6 CONTROLLARE IL CONTENUTO DELLA FORNITURA

AVVISO!

PERICOLO DI DANNI!

» Aprendo incautamente l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti si rischia di danneggiare il massaggiatore. Procedere con cautela all'apertura della confezione.

Controllare che il contenuto della fornitura sia completo e che il massaggiatore non presenti danni. In caso di danni non usare il massaggiatore e rivolgersi al produttore tramite l'indirizzo del Servizio Clienti indicato nella scheda di garanzia.

7 UTILIZZO DEL MASSAGGIATORE

Carica della batteria

Prima di utilizzare il massaggiatore **1** per la prima volta, caricare completamente la batteria. Quando la batteria è scarica, la spia LED **c** dell'elemento di comando **6** lampeggia in verde. Per prolungare la vita della batteria utilizzare il massaggiatore solo a temperature comprese tra 0° C e 40° C.



AVVERTENZA!

PERICOLO DI LESIONI!

» Caricare la batteria ricaricabile del massaggiatore a caldo esclusivamente in ambienti asciutti

» In caso di danni, non utilizzare il massaggiatore.

» Al termine del processo di ricarica, scollegare il cavo di ricarica USB dal massaggiatore.

1. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica **7** alla porta USB, ad esempio con un PC/laptop, una power bank o un alimentatore adatto da collegare alla rete elettrica (alimentatore 5 V / 1 A; non incluso). La batteria inizia a caricarsi.
2. La batteria è completamente carica dopo circa 5 ore. La spia LED **c** dell'elemento di comando **6** si illumina di verde.
3. Al termine della ricarica, scollegare il cavo di ricarica dal massaggiatore.

6

